



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 24987 Obličejový LED panel inSPORTline Coladome 900



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
POPIS PRODUKTU	4
MONTÁŽ.....	4
POUŽITÍ.....	4
POPIS TLAČÍTEK.....	5
SVĚTELNÁ TERAPIE	7
ÚDRŽBA.....	7
SPECIFIKACE.....	7
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	7
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	8

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Před použitím zkontrolujte stav přístroje a LED světla.
- Přístroj používejte v dobře větrané místnosti, vyhněte se místům s vysokou teplotou, vlhkostí a přímým slunečním zářením.
- Přístroj umístěte na pevný, rovný a stabilní povrch v dobře větrané místnosti a mimo dosah slunečního záření.
- Přístroj chraňte proti nárazům a pádům, přístroj přesouvejte pomalu a opatrně.
- Přístroj nepoužívejte společně s dalšími přístroji vyzařujícími teplo.
- Držte mimo dosah vody.
- Nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka.
- Po použití nebo během údržby a skladování přístroj vypněte z elektrického proudu.
- Pokud přístroj vydává abnormální zvuky nebo zápach, okamžitě přístroj přestaňte používat a vypojte z elektrického proudu.
- Přístroj používejte pouze pro účely popsány v manuálu.
- Přístroj sami neopravujte ani neupravujte.
- Přístroj není vhodný pro osoby trpící: srdečními chorobami, vysokým tlakem, onemocněním pokožky, citlivostí na světlo aj.
- Pokud cítíte nevolnost, okamžitě přístroj přestaňte používat.
- Držte mimo dosah dětí a zvířat.
- Před použitím si řádně osušte ruce.
- Držte mimo dosah vznětlivých látek, kapalin a plynů.
- Přístroj čistěte suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Na přístroj nepokládejte další předměty.
- Osoby s poruchou osobnosti, motoriky nebo smysly smí přístroj používat pouze pod dohledem dospělé a zodpovědné osoby nebo po doporučení lékařem.
- Nepoužívejte neschválené příslušenství.
- Před prvním použitím doporučujeme otestovat přístroj na předloktí, pokud se neobjeví alergická reakce nebo citlivost na světlo. Místo zkontrolujte po 1 hodině, pokud se neobjeví žádné známky alergie nebo citlivosti, můžete přístroj používat.
- Vždy používejte ochranné brýle!
- Doporučená teplota provozu: 0 – 26 °C
- Doporučená teplota skladování: 0 – 35 °C
- Relativní vlhkost: <80%
- Četnost použití: lze používat 20 - 30 minut denně po dobu jednoho měsíce nebo po jakémkoli kosmetickém zákroku. V rámci léčby akné doporučujeme použití 3x týdně, alespoň 25 minut.

POPIS PRODUKTU



1. Rám
2. Ovládací panel
3. Napájecí tlačítko
4. Větrací otvor
5. LED světla
6. Adaptér
7. Ochranné brýle

Při pravidelném užívání působí dezinfekčně odstraňuje nechtěné bakterie v pokožce.

MONTÁŽ




1. Připevněte 2x boční panely k hlavnímu panelu s ovládacím panelem.
 2. Po složení přístroje připojte do zařízení napájecí kabel a poté připojte napájecí kabel do zásuvky.
 3. Po úspěšném zapojení do elektrického porodu se ozve zvukový signál.
 4. Pokud jste zařízení špatně připojili, nebude možné jej ovládat.
- Před použitím se ujistěte, že jste přístroj neumístili poblíž dalších zařízení vyzařující teplo nebo lékařských zařízení.
 - Vyhněte se umístění přístroje na místa s vysokou vlhkostí, přístroj umístěte do dobře ventilované místnosti mimo dosah slunečního záření.

POUŽITÍ

Infračervené záření

Doporučená doba použití: 20 – 45 min / jedno sezení (délku upravte dle každého uživatele)


Infračervené světlo lze použít pro celé tělo.

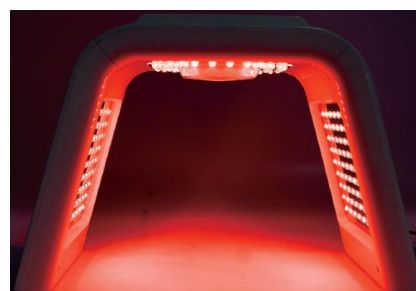

Ultrazvukové čištění

Ultrazvukové čištění doporučujeme používat společně s pleťovou maskou a nebo zhlédit obličej čistou vodou.

Nepoužívejte vysoce koncentrované kosmetické produkty nebo esenciální oleje.

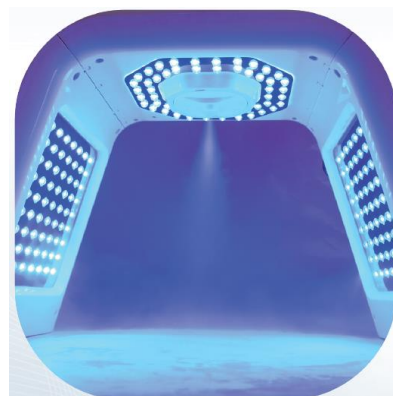

POPIS TLAČÍTEK



Vypínač / spuštění automatického cyklení funkcí

Po zapojení se přístroj přepne do pohotovostního režimu. Stiskem tlačítka se přístroj spustí a zobrazí čas provozu 30 min, opakovaným stisknutím přístroj přepnete do pohotovostního režimu.

Podržením tlačítka po dobu 2 – 3 vteřin se spustí funkce cyklení funkcí.

- Poznámka:**
1. Pokud je spuštěna funkce cyklení, budou se měnit ozařující barvy v pořadí (červená – oranžová – žlutá – zelená – tyrkysová – modrá – fialová).
 2. Během červeného, oranžového, žlutého, zeleného, modrého a fialového světla nemůže být spuštěna funkce cyklení.
 3. Pokud je vybrána funkce cyklení, je intenzita nastavena na 05 stupeň a nemůže být upravena.



Infračervené světlo (vlnová délka 647 – 760 nm)



Intenzita světla může být upravena v 5 stupních 1 (nejnižší) – 5 (nejvyšší). Stiskem tlačítka upravíte intenzitu, nastavená intenzita bude zobrazena na displeji (01 / 02 / 03 / 04 / 05).

B Modré světlo (vlnová délka 430 – 455 nm)



Intenzita světla může být upravena v 5 stupních 1 (nejnižší) – 5 (nejvyšší). Stiskem tlačítka upravíte intenzitu, nastavená intenzita bude zobrazena na displeji (01 / 02 / 03 / 04 / 05).

G Zelené světlo (vlnová délka 492 – 550 nm)



Intenzita světla může být upravena v 5 stupních 1 (nejnižší) – 5 (nejvyšší). Stiskem tlačítka upravíte intenzitu, nastavená intenzita bude zobrazena na displeji (01 / 02 / 03 / 04 / 05).

O Oranžové světlo (vlnová délka 588 – 647 nm)



Intenzita světla může být upravena v 5 stupních 1 (nejnižší) – 5 (nejvyšší). Stiskem tlačítka upravíte intenzitu, nastavená intenzita bude zobrazena na displeji (01 / 02 / 03 / 04 / 05).

Y Žluté světlo (vlnová délka 550 – 580 nm)



Intenzita světla může být upravena v 5 stupních 1 (nejnižší) – 5 (nejvyšší). Stiskem tlačítka upravíte intenzitu, nastavená intenzita bude zobrazena na displeji (01 / 02 / 03 / 04 / 05).

P Fialové světlo (vlnová délka 360 – 430 nm)



Intenzita světla může být upravena v 5 stupních 1 (nejnižší) – 5 (nejvyšší). Stiskem tlačítka upravíte intenzitu, nastavená intenzita bude zobrazena na displeji (01 / 02 / 03 / 04 / 05).

U Ultrazvukový čistící sprej

Funkce může být spuštěna samostatně nebo společně s dalšími funkcemi. Intenzita může být upravena v 5 stupních 1 (nejnižší) – 5 (nejvyšší). Stiskem tlačítka upravíte intenzitu, nastavená intenzita bude zobrazena na displeji (01 / 02 / 03 / 04 / 05). Pokud je zobrazeno 00, funkce je vypnuta.



Původní nastavený čas je 30 min. Po výběru světelné funkce, stiskem tlačítka zvýšíte čas o 5 min až do maxima 60 min. Pokud přesáhnete maximální dobu použití, spustí se čas znovu od 00. Nastavitelný čas rozmezí je od 00 – 60 min. Pokud po dobu 3 vteřin není stisknuto tlačítko, přístroj spustí nastavenou funkci s aktuálně nastaveným časem.



Původní nastavený čas je 30 min. Po výběru světelné funkce, stiskem tlačítka snížíte čas o 5 min až do minima 00 min. Pokud přesáhnete minimální dobu použití, spustí se čas znovu od 60. Nastavitelný čas rozmezí je od 00 – 60 min. Pokud po dobu 3 vteřin není stisknuto tlačítko, přístroj spustí nastavenou funkci s aktuálně nastaveným časem.

SVĚTELNÁ TERAPIE

Červená

Stimuluje produkci kolagenu. Vhodné pro opravu tkání a nahrazení starých tkání pokožky. Vhodné pro zmenšení pórů.

Zelená

Pomáhá srovnat barvu pigmentu a urychlit regeneraci pokožky.

Modrá

Vhodné pro zničení bakterií a zklidnění pokožky.

Oranžová/Žlutá

Dodává pokožce energii, redukuje vrásky, srovnává barvu pigmentu, zlepšuje jemnost pokožky aj.

Fialová

Vhodné proti akné.

ÚDRŽBA

- Přístroj čistěte pomocí jemného suchého hadříku.
- Přístroj skladujte rozložený na suchém a stinném místě.
- Před jakoukoliv údržbou a manipulací, je nutné přístroj nejprve vypojit z elektrického proudu.
- V případě jakékoliv poruchy kontaktujte reklamační / servisní oddělení.

SPECIFIKACE

Vyrobeno	Čína
Zdroj napájení	DC12V, 2A, 50Hz/60Hz
Napájení	Ca. 24W
Rozměr	455 x 220 x 315 mm
Hmotnost	1,9 kg ± 10%

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy

- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
 Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
 Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
 DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
 Mail: eshop@insportline.cz
 reklamace@insportline.cz
 servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
 DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
 Mail: objednavky@insportline.sk
 reklamacie@insportline.sk
 servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: