



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

**IN 28325 Elektrický masážní a vyhřívací bederní pás
inSPORTline Soncharge**



OBSAH


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
POUŽITÍ.....	4
OVLÁDÁNÍ.....	4
NABÍJENÍ.....	5
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	5
FAQ	5
SPECIFIKACE	6
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	6
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	6

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Poškozený nebo opotřeбенý produkt nepoužívejte.
- Produkt není vhodný pro následující osoby:
 - Těhotné ženy, nebo ženy po nedávném porodu.
 - Osoby citlivé na teplo, nebo neschopné správně určit teplotu.
 - Osoby trpící cukrovkou nebo horečkami.
 - Osoby po chirurgickém zákroku nebo podstupující léčbu, kterou může negativně ovlivnit vyšší teplota.
 - Osoby po úrazu beder.
 - Osoby trpící rakovinou, nádory, onemocněním srdce, hypersenzitivitou aj.
 - Osoby, které mají v těle kovy nebo jiné zdravotnické pomůcky jako je kardiostimulátor.
 - Osoby trpící zlomeninami, vývrtem, záněty nebo migrénou.
 - Nezletilé osoby nebo osoby se sníženou motorickou nebo mentální schopností.
- Pro nové uživatele doporučujeme používat první teplotní stupeň.
- Doporučujeme produkt používat nepřetržitě po dobu max. 30 min. Vždy kontrolujte tělesné projevy.
- Po použití může být pokožka krátkodobě zarudnutá. Pokud zarudnutí přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud pociťujete jakékoliv nepříjemné pocity, bolest, nevolnost nebo jiné negativní projevy, okamžitě ukončete provoz a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Funkci masáže používejte rozumně, nepřetěžujte tělo.
- Používejte při okolních teplotách 5°C – 40°C.
- Nepoužívejte, pokud jste unavení nebo během spánku.
- Během použití odpočívejte, neprovádějte další náročné činnosti.
- Na produkt si neseďte nebo nestoupejte.
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, nebo produkt nepoužívejte/neovládejte, pokud máte vlhké ruce. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Produkt nezakrývejte, hrozí riziko přehřátí a požáru.
- Během čištění a údržby je nutné přístroj vypojit z elektrického proudu.
- Chrňte proti zvířatům a malým dětem.
- Produkt neopravujte ani neupravujte.
- Obsahuje lithiovou baterii. Nevhazujte do otevřeného ohně, nepokládejte blízko zdrojů tepla, plamenů a vody.
- Netahejte za napájecí kabel. Pokud je napájecí kabel poškozen, okamžitě ukončete provoz a kontaktujte servisní oddělení.
- Na kabel nepokládejte další předměty, nešlapejte nebo nelamte.
- Doporučujeme pás používat přes vrstvu oblečení.

POPIS PRODUKTU

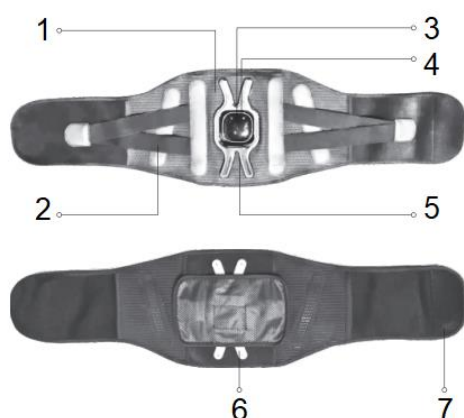

1. Výztuha

2. Stahovací pás

3. Indikační světlo

4. Napájecí tlačítko

5. Ovládání


6. Kapsička

7. Suchý zip

POUŽITÍ

Před nasazením pásu si sundejte všechny doplňky jako jsou pásky aj.

Pokud chcete uložit předměty do kapsičky, je nutné je nejprve vložit do textilního obalu.

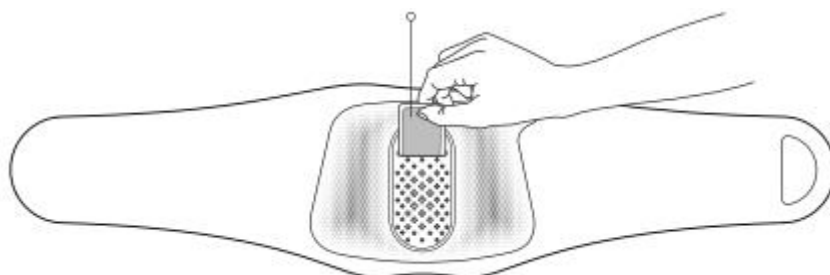

Nastavte požadovanou délku pásu pomocí suchého zipu. Ujistěte se, že je ovladač umístěn ve středu beder.




OVLÁDÁNÍ

- Podržte tlačítko napájení po dobu 2 vteřin pro spuštění. Ozve se zvukový signál. Přístroj se automaticky vypne po 15 min aktivity. Změna teploty neovlivňuje délku časovače vypnutí.
- Lze nastavit 3 úrovně teploty: H1 - 40 °C, H2 - 45 °C, H3 - 50 °C
- Při změně teploty se ozve krátký zvukový signál.
- Lze nastavit 3 typy vibrací: F1 (jemná), F2 (rytmická), F3 (tlaková)
- Při změně vibrace se ozvou dva krátké zvukové signály.

NABÍJENÍ

- Připojte nabíječku do strany ovládání.
- Připojte kabel do nabíječky 5V=1A a zapojte do elektrického proudu.
- Během nabíjení bude indikátor svítit červeně, po nabití se rozsvítí zeleně.
- Doba nabití jsou přibližně 4 hodiny.
- Během nabíjení přístroj nespouštějte.

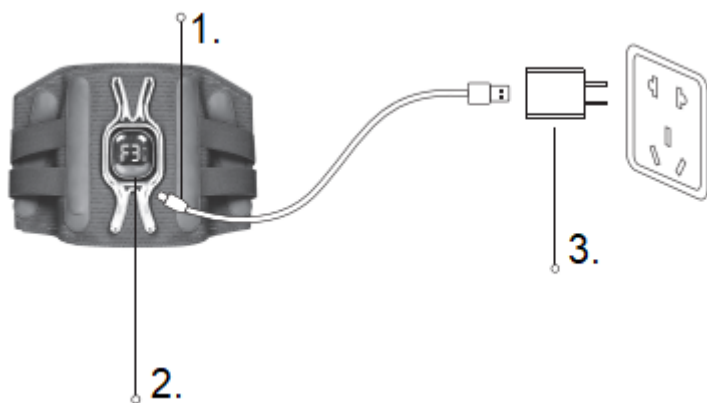

1. Nabíjecí kabel

2. Nabíjecí port

3. Nabíječka (není součástí balení)

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním se ujistěte, že je přístroj vypnutý a není připojený k nabíječce.
- Ovládací panel chraňte proti vlhkosti a vodě. Displej čistěte pomocí jemného hadříku.
- Textilní části můžete očistit pomocí vody, pokud jsou odejmuty masážní / elektronické prvky.
- Po očištění vodou je nutné nechat řádně osušit.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky na bázi alkoholu, benzínu a rozpouštědla.

FAQ

Nelze spustit	Vybitá baterie	Nabijte baterii
	Připojeno k nabíječce	Vypojte nabíječku
Indikátor nabíjecí se nerozsvítí	Kabel není správně připojen	Zkontrolujte připojení kabelu
Slabá kapacita baterie	Životnost baterie je přibližně 5 let provozu	Kontaktujte servisní oddělení
Pás se neohřívá	Nesprávná okolní teplota	Okolní teplota musí být 5°C – 40°C
Přestane fungovat během provozu	Baterie je vybitá	Nabijte baterii
	Automatické vypnutí po 30 min provozu	Restartujte zařízení

SPECIFIKACE

Provozní napětí	3.7 V
Provozní výkon	8 W
Nabíjecí napětí	5 V
Nabíjecí proud	1 A
Hmotnost	0.62 kg
Kapacita baterie	2000 mAh
Rozhraní připojení	USB-C
Typ baterie	Zabudovaná lithiová baterie

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolačka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamáce zboží



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

