



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ


IN 28768 Nabíjecí silikonová ošetřující LED maska inSPORTline Santorina

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Používejte pouze za účelem, za jakými byl produkt vyroben.
- Nepoužívejte, pokud jste prodělali jakoukoliv operaci, úraz obličeje nebo jste podstoupili jakoukoliv lékařskou / kosmetickou proceduru.
- Před použitím se poradte s lékařem.
- Nepoužívejte, pokud jste během předchozího použití pozorovali zarudnutí nebo otok. Pokud zarudnutí nebo otok přetrvá déle jak 2 hodiny, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud máte citlivou pokožku, poradte se o použití s lékařem.
- Nepoužívejte na otevřené rány.
- Po použití je možná vyšší citlivost pokožky na sluneční záření.
- Není vhodné pro děti.
- Produkt sami neopravujte ani nemodifikujte.
- Nedívejte se přímo do světla.
- Nepřesahujte doporučenou dobu použití.
- Pokud trpíte následujícími onemocněními poradte se o použití s lékařem: nádory, záněty, citlivost na teplo, citlivost na světlo, otevřené rány, krvácivost, oděrky na pokožce, otoky, zarudnutí pokožky aj.
- použití se poradte s lékařem, pokud jste těhotná.
- Pokud pociťujete nevolnost nebo nepříjemné pocity okamžitě ukončete provoz.
- Před použitím očistěte pokožku od kosmetických výrobků a krémů.
- Nepoužívejte poblíž vody nebo nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
- Držte mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně.
- Nepoužívejte, pokud je poškozena baterie, nabíjecí kabel nebo nabíječka.
- Používejte a nabíjejte v dobře ventilované místnosti mimo dosah výbušných plynů.
- Poškozený nebo opotřeбенý produkt nepoužívejte.
- Nenabíjejte déle jak 1 hodinu.
- Chraňte proti nárazům a pádům.
- Během použití produkt nezakrývejte.
- Během nabíjení nelze používat.
- Před umístěním masky na obličej, otestujte zařízení na paži.
- Doporučená frekvence použití: 3 – 5x za týden, 10 – 20 min

POPIS PRODUKTU

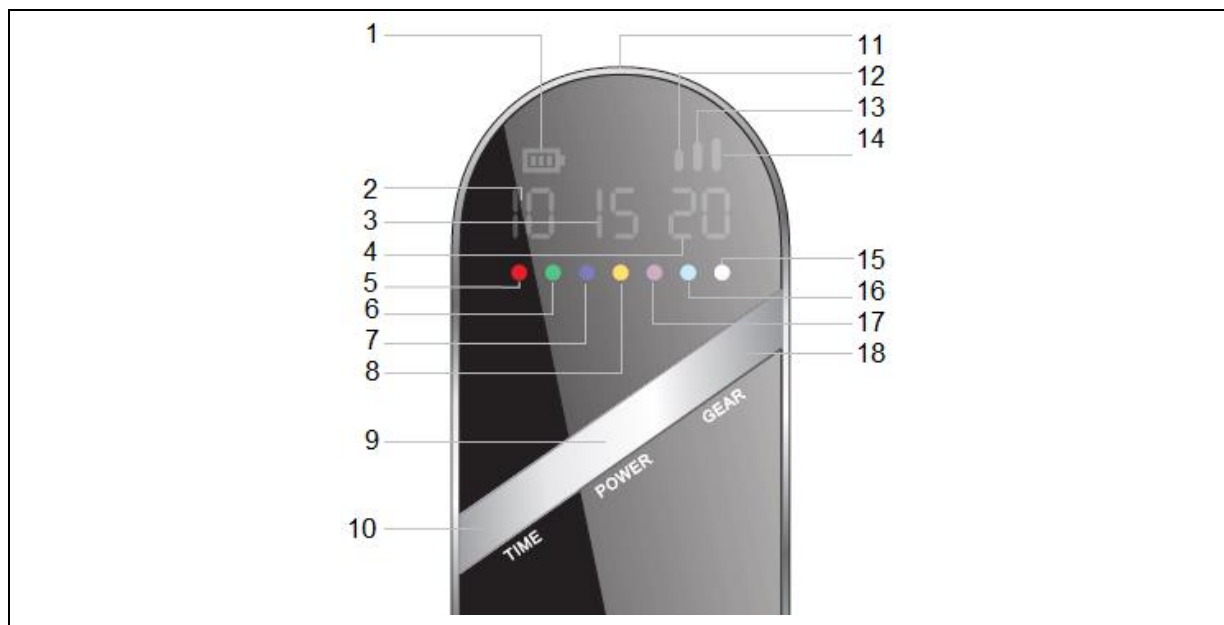

1. Indikátor baterie	10. Čas
2. 10 min	11. Nabíjecí port / port výstupu
3. 15 min	12. 1 stupeň
4. 20 min	13. 2 stupeň
5. Červené světlo	14. 3 stupeň
6. Zelené světlo	15. Bílé světlo
7. Modré světlo	16. Světlo modré světlo
8. Žluté světlo	17. Fialové světlo
9. Tlačítko napájení / režimu	18. Stupeň

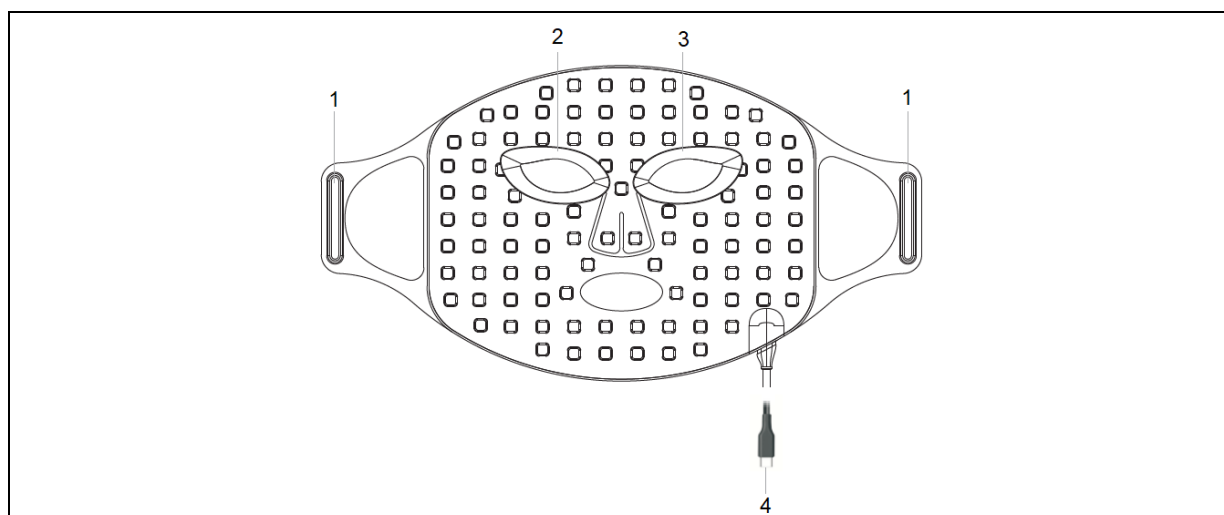

1. Upevnění popruhu	3. Pravá ochrana oka
2. Levá ochrana oka	4. USB-C konektor

POUŽITÍ

Před umístěním masky na obličej doporučujeme otestovat masku umístěním na paži.

1. Umístěte masku na paži.
2. Stiskem tlačítka POWER masku spustíte, dokončete 10 min program.
3. Pokud pociťujete pálení nebo nepříjemné pocity okamžitě ukončete provoz.
4. Po testování počkejte alespoň 6 hodin a pozorujte ošetřené místo. Pokud pozorujete zarudnutí, vyrážku, svědění nebo jiné problémy, masku nepoužívejte.

Frekvence použití: 3 – 5 dní týdně po dobu 10 – 20 min.

První použití doporučujeme masku používat na 1 – 2 úroveň intenzity. Po vybudování tolerance můžete intenzitu navyšovat.

Podle reakce pokožky nastavte intenzitu a délku použití. (pro modré světlo by neměla doba použití překročit 10 min)

Před použitím je nutné očistit pokožku od nečistot, kosmetických výrobků, krémů, olejů atd. Před nasazením masky pokožku vysušte.

Umístěte masku na obličej a zajistěte pomocí popruhů. Podržením tlačítka POWER masku spustíte.

Maska se spustí na červeném světle. Stiskem tlačítka POWER přepínáte mezi jednotlivými režimy světla.


Dobu použití upravíte stiskem tlačítka TIME. Použití můžete kdykoliv ukončit podržením POWER tlačítka.

Intenzitu můžete upravit pomocí tlačítka GEAR.


Po odejmutí masky můžete aplikovat kosmetické produkty.

Masku očistíte pomocí vlhkého hadříku, nepoužívejte chemické prostředky. Před čištěním se ujistěte, že je maska vypnuta a není zapojena v nabíječce.


UPEVNĚNÍ MASKY NA OBLIČEJ

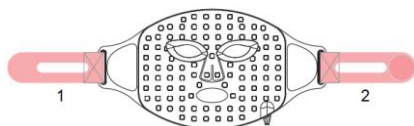

1. levý popruh, 2. pravý popruh

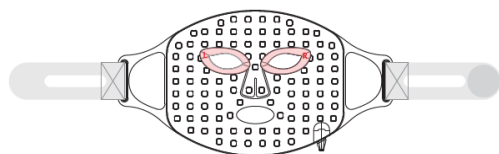

Odejměte krycí fólii a připevněte levou a pravou ochranu očí.

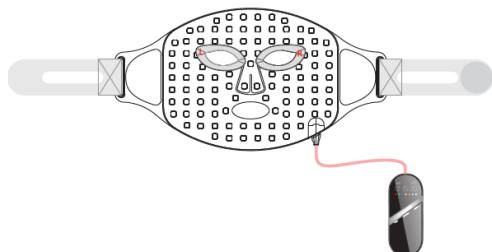

Připevněte ovladač pomocí USB-C konektoru.

TYP OSVĚTLENÍ

Červené světlo

Stimuluje produkci kolagenu. Vhodné pro opravu tkání a nahrazení starých tkání pokožky. Vhodné pro zmenšení pórů.

Zelené světlo

Pomáhá srovnat barvu pigmentu a urychlit regeneraci pokožky, snižuje mastnotu.

Modré světlo

Vhodné pro zničení bakterií a zklidnění pokožky, potlačuje záněty.

Žluté světlo

Dodává pokožce energii, redukuje vrásky, srovnává barvu pigmentu, zlepšuje jemnost pokožky aj.

Fialové světlo

Vhodné pro pleť se sklonem k tvorbě pupínků.

Světle modré světlo

Podporuje energii buněk a metabolismus.

Bílé světlo

Zlepšuje pevnost pokožky a zrychluje metabolismus tkání.

SPECIFIKACE

LED světla	Červené, zelené, modré, žluté, fialové, světle modré, bílé
Počet světél	100 ks
Baterie	1500 mAh
Napětí	5V / 1A
Výkon	Ca. 6.5 W
Rozměr ovladače	110x45x22 mm
Rozměr masky	380x200x3 mm
Časovač	10 / 15 / 20 min
Materiál	ABS + silikon
Obsah balení	1x LED maska, 1x ovladač, 2x ochrany očí, 2x elastické pásky, 1x manuál, 1x nabíjecí kabel, 1x skladovací vak

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebenění brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž

doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ
SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

