



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 29103 Kompresní masážní přístroj inSPORTline Compini

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtete manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Během prvního použití doporučujeme používat nižší intenzitu.
- Pokud pociťujete bolest, nepříjemné pocity, nebo nevolnost, okamžitě ukončete provoz a kontaktujte lékaře.
- Nepoužívejte společně s vyhřívacím zařízením (deky, podložky aj.)
- Držte mimo dosah vody.
- Před použitím očistěte a osušte pokožku. Nepoužívejte na vlhkou nebo mokrou pokožku.
- Osoby s omezenou fyzickou nebo mentální kapacitou smí produkt používat pouze pod dohledem odpovědné dospělé osoby nebo opatrovníka.
- Během použití doporučujeme nechat končetiny v klidu. Neprovádějte žádné další činnosti.
- Během použití nekonzumujte alkohol, drogy nebo léky ovlivňující úsudek.
- Chraňte proti fyzickému poškození.
- Pokud se na přístroji objeví poškození, nebo se během provozu projeví abnormality, okamžitě ukončete provoz a nepoužívejte, dokud se závada neopraví.
- Nepoužívejte, pokud trpíte kožním onemocněním; záněty, otevřenými ranami či nezahojenými poraněními v oblasti použití; osoby po nebo před operací křečových žil; srdečním onemocněním; ucpanými cévami apod.
- Skladujte mimo dosah dětí a zvířat.
- Dlouhodobě nevystavujte slunečnímu záření. Nepoužívejte v místnostech s vysokou vlhkostí (sauny, bazény aj.)
- Během použití neusínejte.

OBSAH BALENÍ

1x přístroj, 1x USB-C nabíjecí kabel, 1x manuál

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA, SKLADOVÁNÍ

Před čištěním a údržbou vypněte přístroj. Povrch očistěte 75% roztokem alkoholu. Hadřík pouze navlhčete, zabraňte vniku tekutin do přístroje. Po čištění nechte volně vyschnout a uložte na čisté, stinné a suché místo.

POUŽITÍ

Pro spuštění / vypnutí podržte vypínač po dobu 2 vteřin.




1. Program

2. Dioda vyhřívání

3. Stav baterie

4. Tlak

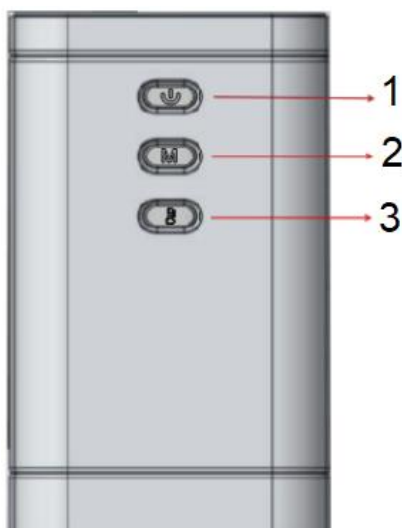

1. Vypínač a nastavení tlaku

2. Výběr programu

3. Tlačítko vyhřívání

PROGRAMY

Mezi programy přepínáte stiskem tlačítka M, přepínání probíhá v cyklu F1, F2, F3, F1...

F1

Délka jednoho cyklu: max. 90 vteřin

Čas pro nafouknutí vzduchové komory: 30 vteřin

Délka nafouknutí komory na maximální hodnotě: 10 vteřin

Tlak se průběžně mění ve vzduchových komorách v nastaveném cyklu.

F2

Délka jednoho cyklu: max. 80 vteřin

Čas pro nafouknutí vzduchové komory: 60 vteřin

Délka nafouknutí komory na maximální hodnotě: 10 vteřin

Program současně nafoukne dvě vzduchové komory.

F3

Program v cyklu opakuje funkce programů F1 a F2.

NASAZENÍ A OVLÁDÁNÍ

Otevřete suchý zip a umístěte kolem lýtky. Při umístění dbejte na směr displeje ovládacího panelu, musí směřovat nahoru.

Pro spuštění podržte tlačítko napájení po dobu 2 vteřin, ozve se zvukový signál, rozsvítí se displej a zobrazí se původní hodnoty (Režim F1, tlak: 60 mmHg)

Stiskem tlačítka vypínače lze nastavit tlak ve 3 hodnotách, 60 / 80 / 90 mmHg, hodnota se upravuje v cyklu.

Stiskem tlačítka pro vyhřívání spustíte / vypnete vyhřívání (45°C ~ 55°C).

Stiskem tlačítka M přepnete mezi jednotlivými programy. Na výběr jsou 3 programy F1, F2, F3.

Po použití vypnete ovladač a poté odepněte suchý zip.

SPECIFIKACE

Hmotnost: 400 g	Velikost: 600*350*2,5 mm
Jmenovité napětí: 3.7V	Síla tlaku: 60/80/99 mmHg
Jmenovitý výkon: 5W	Počet programů: F1, F2, F3
Kapacita baterie: DC3.7V 2500 mAh polymer baterie	Teplota vyhřívání: 45°C ~ 55°C
Způsob nabíjení: DC5V/1500~2000, USB-C	Hlučnost: <55 dBm
Skladovací teplota: -40°C ~ +70°C	Provozní teplota: +10°C ~ +40°C

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebenění brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamáce zboží



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

