



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 29645 Svalový a nervový masážní přístroj inSPORTline Zapster

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Elektrody neodstraňujte z těla, pokud je přístroj aktivní.
- Elektrody nikdy neumísťujte na hlavu.
- Elektrody mohou způsobit iritaci pokožky nebo zvýšit citlivost pokožky, a to z důvodu elektrické stimulace nebo použití vodivého gelu. Pokud tak nastane, okamžitě ukončete provoz a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Osoby s onemocněním srdce nebo epilepsií, nebo podezřením na dané onemocnění, nesmí produkt používat.
- Elektrody neumísťujte na: otevřené rány, vyrážky, nateklé oblasti, zarudlou pokožku, oblast trpící infekcí, záněty, křečové žíly a jiná poranění pokožky.
- Elektrody neumísťujte na krk, mohou způsobit stáhnutí svalů a zhoršit dýchání, krevní tlak nebo způsobit arytmiu srdce.
- Elektrody neumísťujte na hrudník, proud může způsobit arytmiu srdce.
- Elektrody neumísťujte na oblasti s výskytem nádorů.
- Elektrody neumísťujte na oblasti s kovovými implantáty.
- Nepoužívejte během spánku, řízení nebo plavání.
- Pokud trpíte komplikacemi během menstruace nebo jste po porodu, poraďte se o použití s lékařem.
- Elektrody neumísťujte na oblast, která slouží jak krátkodobě nebo dlouhodobě pro vpich injekcí.
- Nepoužívejte, pokud jste v nedávné době prodělali chirurgický zákrok.
- Nepoužívejte, pokud trpíte ischemickou chorobou dolních končetin.
- Není vhodné pro děti.
- Zařízení nepoužívejte nebo nepřenášejte do oblastí s MRI, CT, přístroji využívající elektromagnetické nebo sonické vlny, přes detektory kovů a podobné oblasti.
- Produkt neupravujte, nemodifikujte ani sami neopravujte.
- Nepoužívejte, pokud využíváte kardiostimulátor nebo jiné elektronické zdravotnické zařízení.
- Nepoužívejte v místnostech s vysokou vlhkostí jako jsou koupelny, sprchové kouty, bazény aj.

- Elektrody nepoužívejte během koupele.
- Plochy elektrod se nesmí překrývat.
- Elektrody neumísťujte na tepny, chrupavku a kosti.
- Elektrody nepoužívejte v následujících případech: těhotenství, nebo podezření na těhotenství.
- Elektrody neumísťujte na šperky, piercingy a jiné kovové předměty umístěny na těle.
- Nepoužívejte v místnostech s hořlavými nebo výbušnými plyny.
- Produkt nepoužívejte, pokud operujete motorové vozidlo, těžké stroje nebo při činnostech, při kterých by náhlý stah svalu mohl ohrozit život.
- Před použitím se poraďte s lékařem, pokud jste osoby s onemocněním srdce, nebo s vyšší citlivostí na srdeční arytmií.
- Před použitím se poraďte s lékařem, pokud trpíte cukrovou a užíváte inzulin.
- Před použitím se poraďte s lékařem, pokud navštěvujete rehabilitační centrum.
- Před použitím se poraďte s lékařem i tehdy, pokud trpíte onemocněním nebo úrazem, které není vyjmenováno v manuálu.
- Elektrody mohou ovlivnit nebo zhoršit příznaky: krvácivosti po nehodě, úrazu nebo poranění. Mohou ovlivnit rekonvalescenci po operačním zákroku. Menstruace.
- Nikdy elektrody neumísťujte na tělo, pokud je přístroj spuštěný. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Pokud chcete elektrody přemístit, je potřeba přístroj vypnout.
- Elektrody se používají jako pár, nikdy nezapojujete elektrody do sebe.
- Pokud pociťujete nevolnost, bolest hlavy, případně ztrátu vědomí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Produkt je vhodný pro použití zdravé osoby. Produkt je vhodný pouze pro dospělé osoby se zdravou pokožkou.
- Před aplikací elektrod řádně očistěte pokožku od nečistot a osušte.
- Používejte pouze originální části nebo jejich schválené náhrady. Nekombinujte jiné modely nebo typy přístroje.
- Elektroda musí na pokožku přiléhat po celé ploše. Elektrody, které nepřiléhají, nepoužívejte.
- Před použitím zkontrolujte vodivý gel elektrod. Pokud je vyschlý, elektrodu nepoužívejte.
- Zarudnutí pokožky po použití je běžné, pokud zmizí do 30 min od použití. Pokud zarudnutí nezmizí do 30 min, elektrody na danou oblast nepoužívejte, dokud zarudnutí nezmizí.
- Pro náhradu a kompatibilitu elektrod kontaktujte výrobce.
- Elektrody mají životnost 20 – 30 použití v závislosti na intenzitě použití, podnebí, skladování atd.
- Pokud se po použití objeví dlouhodobá iritace pokožky, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Elektrody nahraďte, pokud nelepi, jsou poškozené nebo opotřebené.
- Pravidelně kontrolujte oblast použití.
- Zařízení neslouží jako náhrada profesionální lékařské péče.
- Vhodné pro domácí použití.





Křehké, chráňte proti fyzickému poškození



Před použitím si přečtěte manuál



Příložná část typu B



Produkt nelze vytřídit do kontejnerů na tříděný odpad, ani do komunálního odpadu. Nutné odveztat prodejci nebo předat k ekologické likvidaci v rámci obce.


POPIS PRODUKTU

- Velký podsvícený LCD displej.
- A / B výstupy s rozdílnou intenzitou.
- 3 režimy s programy: **TENS** (P1 – P24), **EMS** (P25 – P48), **Relax** (P49 – P60)

EMS vytváří intenzivní kontrakce svalů při tréninku nebo jemné vibrace při relaxaci.

TENS je aplikace elektrického proudu přes pokožku, která dráždí nervové kmeny a vlákna, což vede ke zmírnění bolesti.


- Dobíjecí 180mAh baterie s provozem až 10 hodin na jedno nabití.
- Nastavení délky provozu: 10 – 60 min, původní hodnota: 20 min.

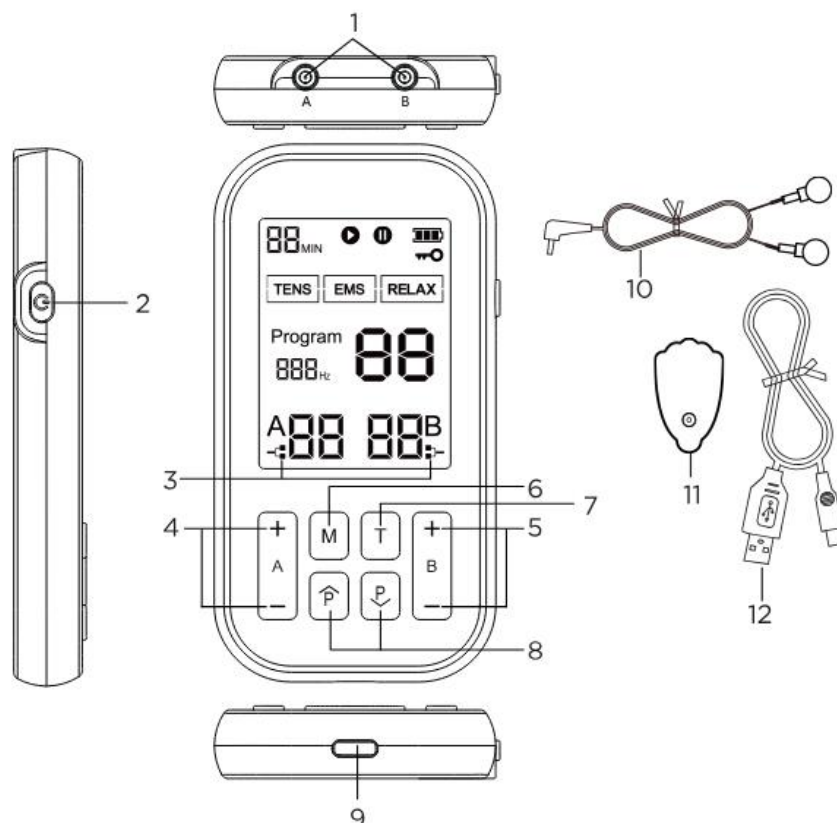


- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Výstup: kanály A/B | 7. Nastavení časovače / pauza |
| 2. Vypínač / zámek | 8. Nastavení programu |
| 3. Ukazatel úspěšného připojení | 9. USB-C nabíjecí port |
| 4. Úprava intenzity pro kanál A | 10. Připojovací kabel elektrod |
| 5. Úprava intenzity pro kanál B | 11. Elektrody |
| 6. Výběr režimu (TENS/EMS/FITNESS) | 12. USB-C kabel |

POUŽITÍ


1. Zapojte kabely do výstupu

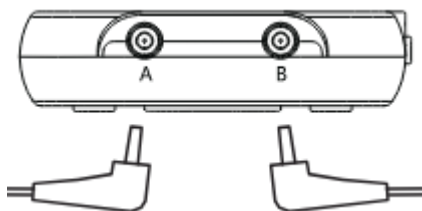


2. Připojte elektrody a odejměte ochranný film

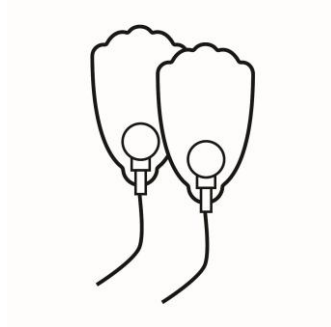

3. Připevněte elektrody na čistou pokožku

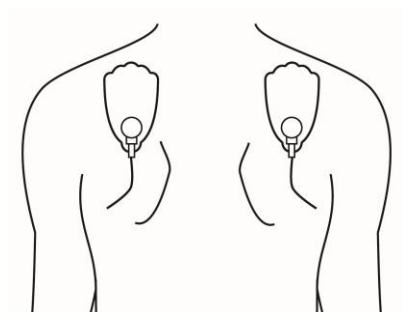


4. Pro spuštění podržte tlačítko, stiskem zamknete ostatní tlačítka kromě vypínače

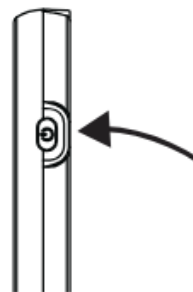


5. Stiskem „M“ vyberte režim




6. Stiskem $\hat{P}/\hat{P}$ vyberte program

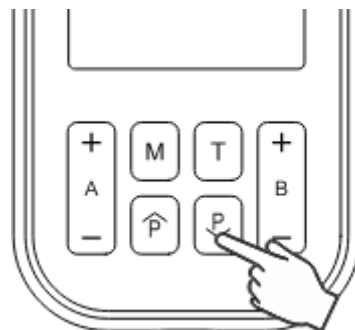

7. Stiskem „+ / -“ upravíte intenzitu pro vybraný kanál

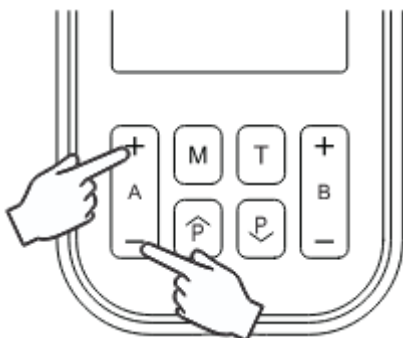

8. Stiskem „T“ změníte délku provozu. Podržením pozastavíte a spustíte program.

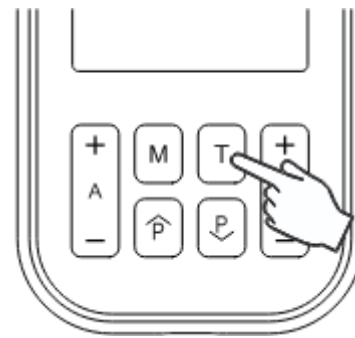

POLOHY ELEKTROD








Kanály zařízení:


Zařízení má dva nezávislé kanály: Kanál A a Kanál B. Každý kanál může být použit pro:

- Dvě různá místa na těle jedné osoby, nebo
- Dva různé lidi.

Každý kanál lze nastavit na různé režimy a úrovně intenzity.

- Černé/běžové podložky označují, že jsou na stejném kanálu.
- Čtyři podložky (dvě pro každý kanál) mohou pracovat současně, ale ujistěte se, že podložky stejné barvy jsou umístěny na jednu osobu, pokud je zařízení používáno pro dvě osoby.

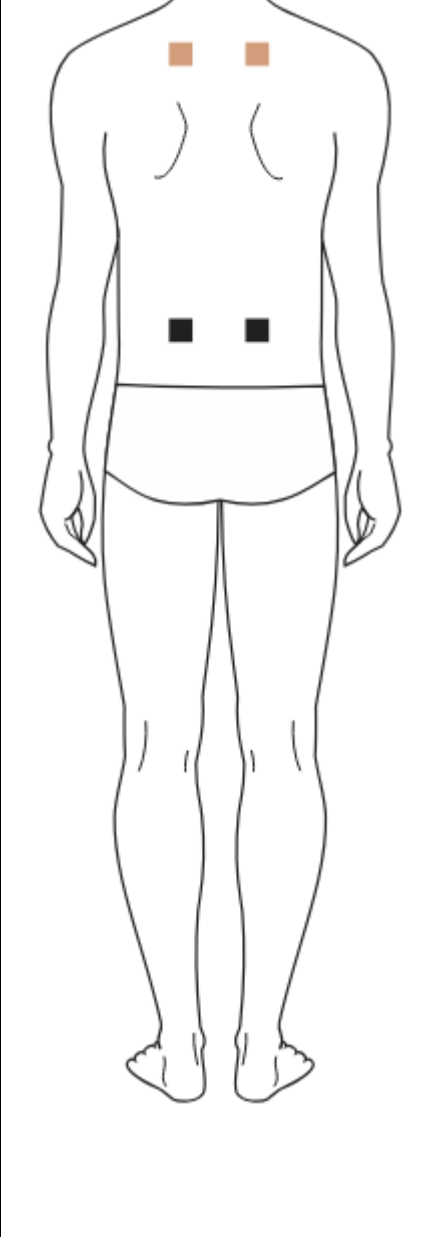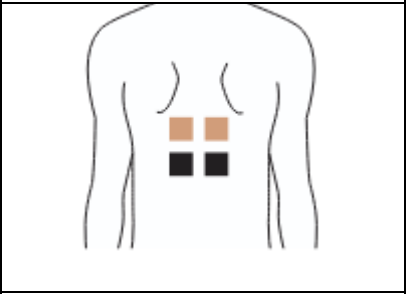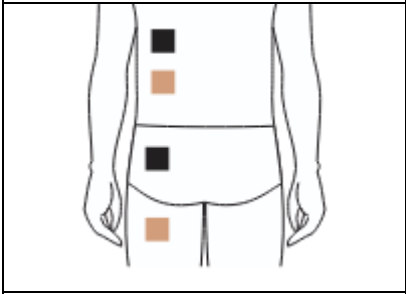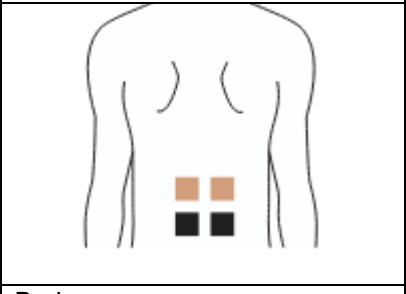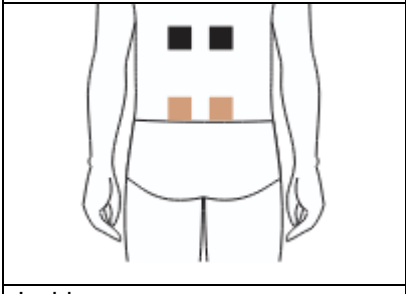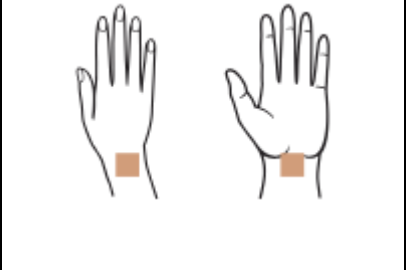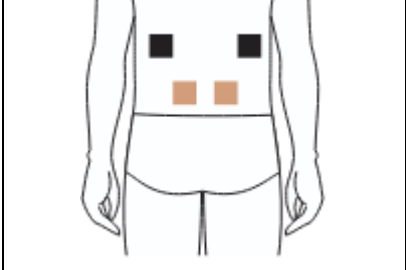		
Ztuhlá ramena		Svaly krku
		
Vzpřimovače trupu		Kyčle
		
Bedra		Ischias
		
Karpální tunely		Vyhřezlá ploténka

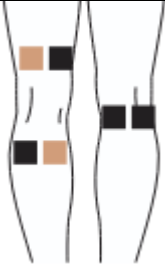		
Bolest ramen	Chronická bolest kyčle	Bolest kolenn
		
Spodní část nohou	Bolest chodidel	

TIPY PRO PŘÍPRAVU POKOŽKY

Pro snížení rizika iritace pokožky, obzvláště pokud trpíte citlivou pokožkou.

- Očistěte oblast použití pomocí mýdla a vody. Mýdlo řádně smyjte a pokožku osušte.
- Oblast otřete ubrousky pro přípravu aplikace.
- Elektrody odjímejte ve směru růstu chloupků.
- Po použití je vhodné na oblast použití aplikovat krém.
- Elektrody nikdy neumisťujte na poškozenou nebo iritovanou pokožku.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Po použití vypněte zařízení a odpojte elektrody. Přístroj skladujte na chladném, suchém a stinném místě.
- Na elektrody po použití opět přilepte ochranné filmy.
- Přístroj dobíjejte alespoň 1x za tři měsíce.
- Elektrody nepoužívejte nepřetržitě v jedné oblasti déle jak 30 min.
- Provozní podmínky: 5°C ~ 40°C, ≤80% RH, 700 hPa ~ 1060 hPa
- Skladovací podmínky: -20°C ~ 55°C, ≤93% RH, 700 hPa ~ 1060 hPa

SKLADOVÁNÍ ELEKTROD

- Skladovací teplota 5°C ~ 27°C
- Vlhkost: 30% ~ 80%

FAQ

Pocit intenzity mezi elektrodami je rozdílný	Běžný jev, rozdílné části těla reagují jinak	Není potřeba žádná úprava, jen se ujistěte, že jsou elektrody upevněny po celé délce.
Intenzita je nízká i na nejvyšší nastavení	Elektrody nejsou správně upevněny	Upevněte správně obě elektrody
	Elektrody nejsou správně upevněny	Ujistěte se, že na elektrodách není ochranný film
	Elektrody se překrývají	Elektrody se nesmí překrývat
	Napájecí kabel není správně upevněn	Ujistěte se, že je napájecí kabel správně upevněn
	Intenzita se postupně snižuje	Tělo si zvyká na nastavenou intenzitu, zvyšte výkon
	Kapacita baterie je nízká	Nabijte baterii
Pokožka je podrážděná nebo zarudnutá	Gelový povrch je vyschnutý nebo znečištěný	Navlhčete konečky prstů a jemně očistěte povrch
	Nadměrná délka použití nebo vysoká intenzita	Zkraťte délku použití nebo snižte intenzitu
	Elektrody jsou opotřebené	Vyměňte elektrody
Vybitá baterie, LCD displej se nespustí	Vybitá baterie	Nabijte baterii
Přístroj se vypne během použití	Vybitá baterie	Nabijte baterii
	Napájecí kabel je poškozen	Vyměňte kabel
Elektrodu nelze upevnit	Ochranný film je stále upevněn na elektrodě	Odejměte ochranný film
	Mokrý povrch	Osušte elektrodu a pokožku
	Gelový povrch je poškozen	Vyměňte elektrody
Gelový povrch je poškozen	Opotřebená elektroda	Vyměňte elektrody
	Elektroda byla nesprávně skladována	Vyměňte elektrody

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků

uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ
SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamacie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamacie@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamacie zboží



Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

