




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 30014 Kompresní masážní nohavice inSPORTline
Complex

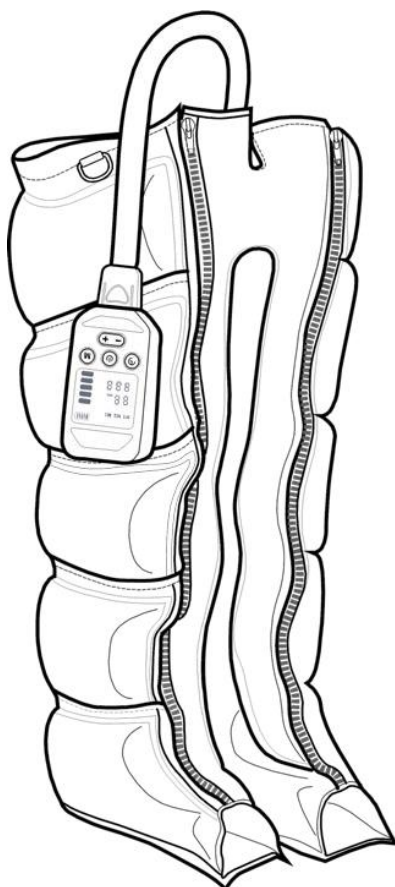

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
OBSAH BALENÍ	4
ROZMĚRY PRODUKTU	4
POUŽITÍ.....	4
PŘIPOJENÍ KOMPRESNÍ JEDNOTKY	5
OVLÁDÁNÍ.....	6
TYPY MASÁŽÍ	7
ČIŠTĚNÍ.....	7
SKLADOVÁNÍ.....	7
FAQ	8
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	8
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	8


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Dlouhodobé nepřetržité použití může vést k bolesti svalů. Délku a intenzitu použití upravte podle reakce vašeho těla.
- Chraňte proti nárazům, pádům, protřžení a podobnému poškození. Držte mimo dosah ohně, zdrojů tepla a plamenů.
- Chraňte proti vodě a vlhkosti. Skladujte na suchém, stinném a čistém místě. Neskladujte poblíž zdrojů tepla nebo chemických látek.
- Během použití nestůjte a neprovádějte další fyzicky namáhavé činnosti.
- Nabíjejte pouze pomocí vhodného kabelu a adaptéru.
- Nenabíjejte bez dozoru. Nabíjejte pouze mimo dosah hořlavých nebo výbušných látek.
- Během použití nohavice nezakrývejte.
- Produkt není vhodný pro těhotné ženy nebo osoby užívající léky, které by mohly ovlivnit tlak, citlivost nebo úsudek.
- Produkt není vhodný pro osoby trpící: hypertenzí, osteopenií, osteoporózou, cukrovkou, křečovými žilami, špatnou citlivostí pokožky, senzitivitou na tlak, s nedávným zraněním nebo operací, skoliózou nebo deformací páteře, osoby s onemocněním srdce nebo vysokým tlakem.
- Použití konzultujte s lékařem, obzvláště pokud trpíte následujícími zdravotními komplikacemi nebo spadáte do vyjmenované kategorie: kožní vyrážka, otevřené rány, puchýře, lokální zánět tkáně, modřiny; hluboká žilní trombóza, osteomyelitida; zlomenina nebo myositis ossificans; vysokým krevním tlakem; akutní nebo závažné onemocnění srdce, jater nebo ledvin; neurologické stavy vedoucí ke ztrátě nebo změně citlivosti; poruchy krvácení; nedávná operace nebo zranění v místě aplikace; poruchy pojivové tkáně; chronická žilní nedostatečnost; těžká skolióza nebo deformace páteře; užíváte kardiostimulátor, ICD nebo jste prodělali infarkt; užíváte léky, které ředí krev nebo mění citlivost; trpíte alergií na materiál produkt (nylon); jste těhotná nebo kojíte; trpíte necitlivostí; rakovinou nebo nádory; epilepsií; kardiopatií
- Produkt nepoužívejte na oblasti obličeje, krku, genitálií.
- Pokud pociťujete bolest nebo nepohodlí, okamžitě ukončete provoz.
- Nepoužívejte během nabíjení.
- Pravidelně nabíjejte 1x za dva měsíce, pokud není zařízení v provozu.
- Neperte v automatické pračce.
- Zařízení není hračka. Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Kompresní jednotku nabíjejte pod dozorem a mimo dosah hořlavých nebo výbušných látek.
- Kompresní jednotku nabíjejte pouze pomocí dodané nabíječky.
- Baterii nevhazujte do ohně nebo neponechávejte poblíž zdrojů tepla.
- Baterii nevhazujte do vody a chraňte proti vlhkosti.
- Zařízení sami neopravujte nebo nemodifikujte.
- Pokud z baterie vychází zápach nebo kapalina, okamžitě ukončete provoz.
- Zařízení nepoužívejte v oblastech s vysokou vlhkostí a teplotou.
- Vhodné pouze pro domácí použití, neslouží jako náhrada zdravotní nebo lékařské péče.

OBSAH BALENÍ

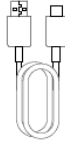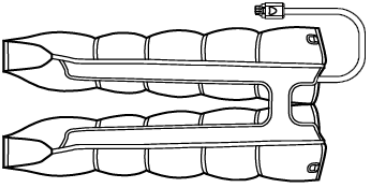
				
Nabíjecí kabel	Kompresní jednotka	Kompresní nohavice	Přenosná taška	Manuál

ROZMĚRY PRODUKTU

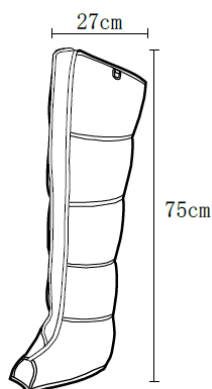


M

Vhodné pro výšku 155-170 cm

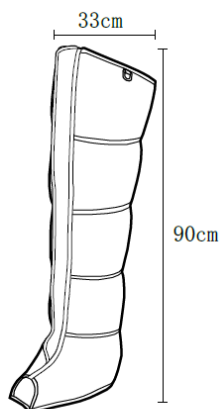

L

Vhodné pro výšku 170-185 cm

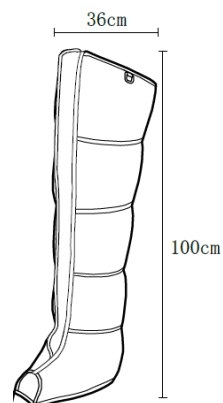

XL


Vhodné pro výšku > 180 cm

POUŽITÍ

Během použití doporučujeme oblečené kraťasy nebo tenké kalhoty. Pohodlně se usadte nebo si lehněte. Nohy musí být v rovině s pasem. Rozepněte kompresní nohavice a umístěte nohy zvlášť do nohavice. Noha by měla být ve středu kompresní nohavice.


Během použití by neměly být kompresní nohavice pokrčeny.

Zařízení nepoužívejte ve stoje nebo během chůze.

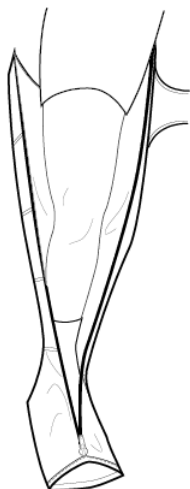


PŘIPOJENÍ KOMPRESNÍ JEDNOTKY

Připojte nafukovací trubice do vývodu vzduchu kompresní jednotky. Ujistěte se, že je konektor správně zajištěný. Uslyšíte cvaknutí.

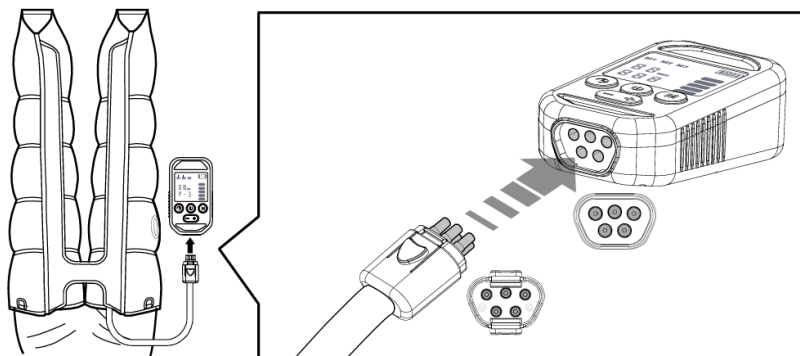


Pomocí magnetu můžete kompresní jednotku připevnit na nohavici.

Varování: mezi magnety nevkládějte ruce, prsty nebo jiné předměty, hrozí riziko skřípnutí.

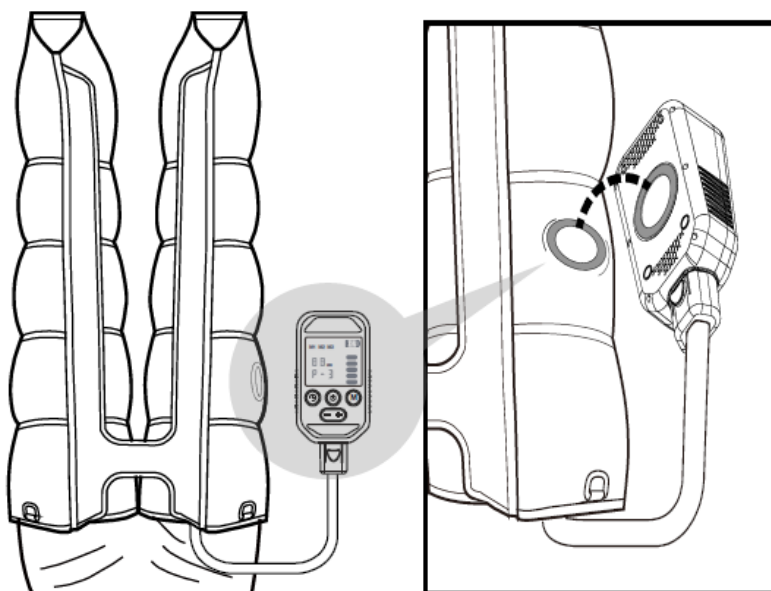


Před spuštěním se ujistěte, že jsou nohavice zavřeny a zajištěny. Nepoužívejte, pokud je zip otevřený.


Pro spuštění stiskněte tlačítko vypínače po dobu 1 vteřiny.

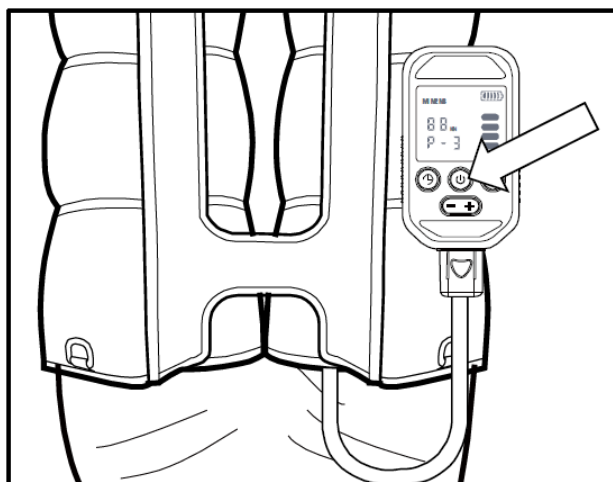

Pro odejmutí kompresní jednotky stiskněte tlačítka na obou stranách konektoru.

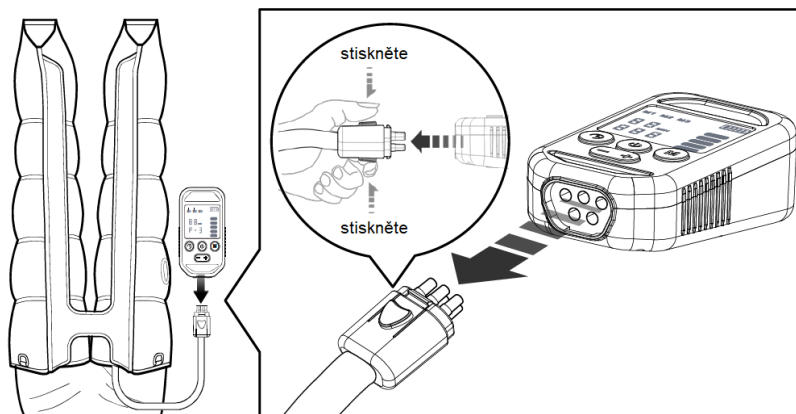

OVLÁDÁNÍ

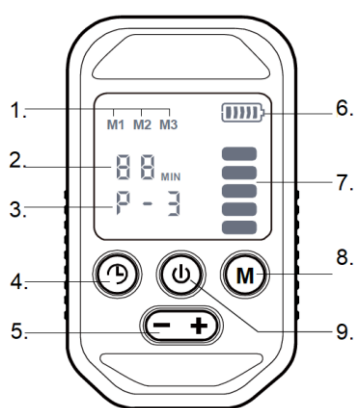


1. Aktuální režim
2. Časovač
3. Intenzita
4. Tlačítko časovače
5. Tlačítko intenzity
6. Stav baterie
7. Aktuální pozice komprese nohavic
8. Tlačítko režimu
9. Tlačítko vypínače

Indikátor baterie zobrazuje 5 segmentů stavu nabití baterie. Pokud indikátor bliká, je baterie vybitá. Kompresní jednotku nelze používat během nabíjení.

Funkce tlačítek

Vypínače		Podržením spustíte / vypnete kompresní jednotku
Časovač		Stiskem nastavíte časovač na 10, 20, 30 min.
Režim		Stiskem změníte režim na M1, M2, M3. Podržením přepnete do manuálního režimu, poté můžete stiskem tlačítka upravit polohu komprese.
Intenzita		Stiskem upravíte intenzitu P1 – P6. Stiskem intenzitu snížíte, stiskem zvýšíte.

TYPY MASÁŽÍ

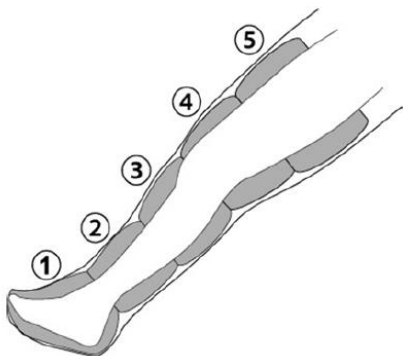

1. Sekvenční masáž: masáž probíhá postupně od 1 do 5 komory
2. Cyklická masáž: cyklická masáž nastavených komor
3. Masáž daného bodu: nastavení masáže danou komorou. Podržte tlačítko M a poté stiskem vyberte komoru.

MANUÁLNÍ REŽIM

Podržte tlačítko M, uslyšíte zvukový signál.

V manuálním režimu můžete stiskem M vybrat masáž specifickou komorou 1 – 5 nebo aktivovat všechny komory.

Stiskem **—** intenzitu snížíte, stiskem **+** intenzitu zvýšíte. P1 – P6

Pomocí tlačítka časovače pak můžete v cyklu nastavit délku použití 10, 20, 30 min.

V případě poruchy nebo nouzového vypnutí, můžete nohavice vypojit z kompresní jednotky.

ČIŠTĚNÍ

- Rozložte nohavice na rovný povrch. K čištění použijte dezinfekci na bázi alkoholu (nepoužívejte prostředek na bázi oleje). Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Vnější části očistěte pomocí jemného hadříku.
- Před dalším použitím musíte nohavice řádně vysušit.

Poznámka: Nohavice neponořujte do vody nebo nečistěte pod tekoucí vodou. Chraňte proti vlivu agresivních čisticích prostředků a rozpouštědel.


SKLADOVÁNÍ

Rozložte na rovný a čistý povrch a nechte nohavice vyfouknout.

Přeložte pravou nohavici přes levou. Zarovnejte okraje.

Od části chodidel začněte skládat nohavice do jedné třetiny a poté ještě jednou. Nohavice neskládejte příliš těsně, hrozí riziko poškození hadic a spojů. Složené nohavice uložte do přenosné tašky.

Před skladováním se ujistěte že jsou nohavice čisté a suché. Skladujte na suchém a stinném místě. Neponechávejte na místech s vysokou teplotou přesahující 45°C.

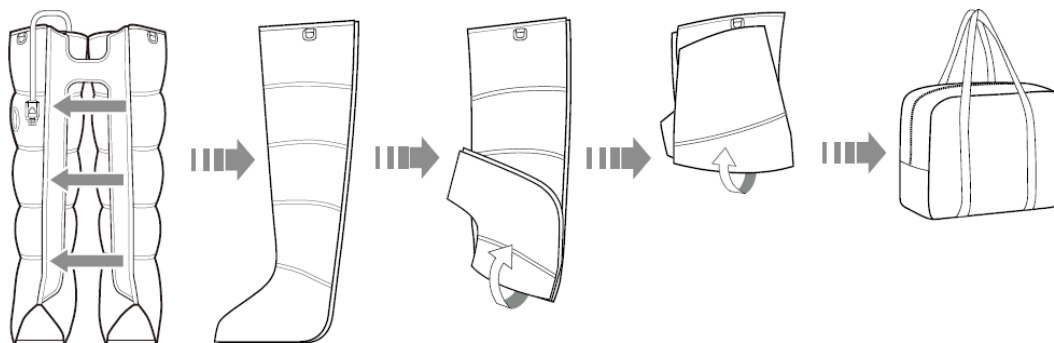

FAQ

Nelze spustit.

Zkontrolujte stav baterie. Ujistěte se, že jste správně stiskli tlačítko vypínače.

Displej nezobrazuje stav nabití během nabíjení.

Ujistěte se, že je konektor správně zapojen.

Náhle vypnutí během použití.

Zkontrolujte stav nabití baterie. Vypnutí z důvodu ochrany proti přehřátí.

CHYBOVÉ KÓDY



E-1 – kriticky nízký stav baterie

Co nejdříve nabijte baterii.



E-2 – únik vzduchu

Zkontrolujte stav vzduchových hadic, jejich připojení a všech spojů.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholý Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších

technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

