



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 31160 Infračervená LED maska na krk a dekolt inSPORTline Rademis

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Používejte pouze v souladu s manuálem.
- Není vhodné pro těhotné a kojící ženy, děti a batolata.
- Není vhodné pro osoby citlivé na světlo, nebo podstupující léčbu pokožky. Před použitím se poradte s lékařem.
- Nepoužívejte, pokud užíváte léky zvyšující citlivost na světlo.
- Během použití musíte mít nasazený ochranné brýle, doporučujeme zavřít oči.
- Pokud pociťujete nevolnost, okamžitě ukončete provoz.
- Produkt není voděodolný, neponořujte do vody.
- Držte mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte poškozený nebo opotřeбенý produkt.
- Produkt sami neopravujte, nemodifikujte nebo nerozebírejte.

SPECIFIKACE

Ovladač		Maska	
Nabíječka	5V/1A nebo 5V/2A	Výkon	3W
Doba nabití	4 hodiny	Vlnová délka	Červená: 630 nm
Počet použití	7x (čas 30 min, L4 úroveň)		Modrá: 470 nm
Baterie	3.7V 2600 mAh		Žlutá: 590 nm
Výstupní výkon	5V/2A		Infračervené záření: 850 nm
Rozměry	123*50*31 mm	Rozměry	269*184*4 mm
Hmotnost	95 g	Hmotnost	145g
Provozní teplota	0°C – 45°C	Provozní teplota	0°C – 45°C
Skladovací teplota	-5°C – 55°C	Skladovací teplota	-5°C – 55°C
Provozní vlhkost	30% - 95%	Provozní vlhkost	30% - 95%
Skladovací vlhkost	20% - 85%	Skladovací vlhkost	20% - 85%

OBSAH BALENÍ

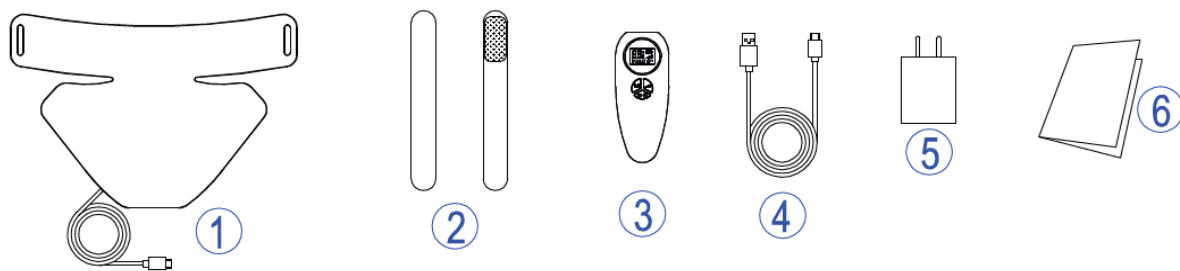

1. LED maska	4. Nabíjecí kabel
2. Popruhy na suchý zip	5. Nabíjecí adaptér
3. Ovladač	6. Manuál

OVLÁDÁNÍ

	1. Porty pro zapojení masky / nabíjení
	2. Časovač
	3. Odpočet času
	4. Symbol časovače
	5. Kapacita baterie
	6. Intenzita
	7. Režim
	8. Dynamické zobrazení
	9. LCD displej
	10. Tlačítka ovládání
	11. Změna režimu
	12. Nastavení intenzity
	13. Vypínač / časovač

Tlačítka



Vypínač / časovač

Podržetím po dobu 2 vteřin spustíte / vypnete ovladač. Stiskem nastavíte délku použití:
30 min / 25 min / 20 min / 15 min / 10 min / 5 min.



Režim

Stiskem přepnete na jeden ze šesti režimů.





Intenzita


Stiskem nastavíte na jednu ze čtyř úrovní intenzity.


Ikony

Baterie


 25% kapacita baterie


 50% kapacita baterie

 75% kapacita baterie


 100% kapacita baterie

Intenzita

 L1 – nejnižší intenzita

 L2

 L3

 L4 – nejvyšší intenzita

Režim

Zobrazení zvoleného režimu.

Časovač

Zobrazení nastaveného časovače:


30^o | 30 min


25^o | 25 min


SPUŠTĚNÍ

Podržetím vypínače  na ovladači spustíte ovladač.

Spustí se původní nastavení: 30 min, intenzita L4, 1. režim.

Pro nastavení času stiskněte tlačítko vypínače / časovače , nastavíte délku použití. Čas se nastaví na zobrazenou délku po 3 vteřinách neaktivity.

Pro nastavení režimu, stiskněte tlačítko pro nastavení režimu . Můžete zvolit jeden ze šesti režimů osvětlení.

Pro nastavení intenzity, stiskněte tlačítko pro nastavení intenzity . Můžete zvolit jednu ze čtyř úrovní.

Ovladač obsahuje ochranu proti nadměrnému vybití. Ovladač nepřetržitě kontroluje napětí baterie. Pokud klesne pod 3 V, symbol baterie bude blikat po dobu 3 vteřin a poté se vypne.

Ovladač obsahuje ochranu proti přepětí. Během nabíjení se zobrazí symbol CH. Baterie se bude nabíjet, dokud napětí nedosáhne 4.2 V. Poté se nabíjení zastaví. Po nabití baterie se zobrazí znak FU.

Poznámka:

- Ovladač nenabíjete během použití.
- Před nabíjením vypněte ovladač.
- Po delším době skladování se může ovladač zcela vybit. Pokud nepůjde spustit, je potřeba jej nabít.

REŽIMY


Režim 1	R	Červené	Stimuluje produkci kolagenu. Vhodné pro opravu tkání a nahrazení starých tkání pokožky. Vhodné pro zmenšení pórů.
Režim 2	B	Modré	Vhodné pro zničení bakterií a zklidnění pokožky, potlačuje záněty.
Režim 3	Y	Žluté	Dodává pokožce energii, redukuje vrásky, srovnává barvu pigmentu, zlepšuje jemnost pokožky aj.
Režim 4	R+IR	Červené + Infračervené světlo	Podporuje regeneraci buněk, urychluje metabolismus, rozkládá podkožní celulitidu, zmenšuje póry, zpevňuje pokožku a zvyšuje elasticitu pokožky.
Režim 5	R+Y+IR	Červené + Žluté + Infračervené světlo	Odbourává celulitidu, zesvětluje chloasmu a pihy, zlepšuje krevní a lymfatický oběh.
Režim 6	R+B+IR	Červené + Modré + Infračervené světlo	Potlačuje záněty pokožky a zjemňuje jizvy, podporuje regeneraci buněk, zlepšuje lymfatický oběh a jemně čistí pleť.

NASAZENÍ MASKY

Test citlivosti pokožky

1. Umístěte masku na vnitřní stranu paže.
2. Zapojte masku do ovladače a spusťte program po dobu 10 min.
3. Pokud pociťujete teplo nebo nepříjemné pocity, okamžitě ukončete provoz.
4. Po testu vyčkejte po dobu 6 hodin. Pokud se objeví zarudnutí, nebo se dostaví svědění pokožky, produkt nepoužívejte.

Popruhy na suchý zip (1) protáhněte tak, aby byly upevněny na straně, kde jsou LED světla (2).

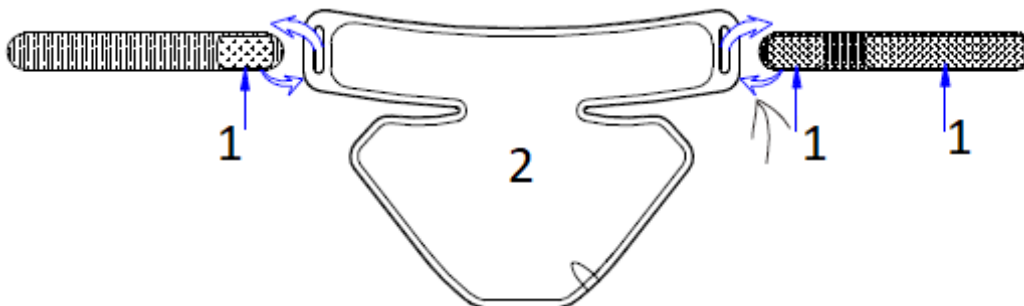

Krok 1

Příprava před nasazením



Očistěte pokožku od make-upu a jiných kosmetických produktů.
Očištěnou pokožku opláchněte vodou a osušte.

Krok 2

Příprava a nasazení masky



Upevněte masku kolem krku a zajistěte pomocí popruhů.

Zapojte do jednoho z výstupů ovladače I/O 1 nebo I/O 2. Spusťte ovladač a nastavte délku použití, režim a výkon.

Krok 3

Očistěte pokožku vodou



Očistěte pokožku vodou a aplikujte kosmetické produkty na ochranu pokožky.

ÚDRŽBA

- Před čištěním vypněte produkt.
- Masku můžete očistit pomocí vlhkého hadříku.
- Viditelné nečistoty můžete očistit pomocí roztoku jemného čistícího prostředku. K dezinfekci lze použít 70% roztok isopropylalkoholu. Roztok naneste na masku a nechte působit po dobu 1 min. Poté očistěte a postup opakujte 3x. Nikdy masku neponořujte do tekutiny, vždy čistěte pouze navlhčeným hadříkem.
- Brýle čistěte stejným způsobem jako masku.
- Po čištění masku osušte a uložte do obalu. Po čištění by maska neměla jevit následky znečištění nebo vlhkosti.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícími na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamační dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ
SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729
Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

