



## UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

### IN 31264 Příklad na masáž krku inSPORTline Yubiko

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku [www.insportline.cz](http://www.insportline.cz), kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

#### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí použití.
- Nepoužívejte současně s elektronickými zdravotními zařízeními (kardiostimulátory, implantabilní kardioverter-defibrilátory (ICD), inzulínové pumpy atd.)
- Pokud pociťujete nevolnost, bolest nebo závratě okamžitě ukončete provoz a kontaktujte lékaře.
- V případě poruchy přístroj nepoužívejte.
- Nepoužívejte nebo nezapojte do nabíječky, pokud máte mokré nebo vlhké ruce.
- Během použití nemějte nasazené šperky.
- Nepoužívejte v leže.
- Nepoužívejte v místnostech s hořlavými nebo výbušnými plyny.
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí nebo v prostředí s vysokou teplotou.
- Chraňte proti vniku vody.
- Chrňte proti fyzickému poškození a nárazům.
- Nepoužívejte, pokud provádíte další činnosti, které vyžadují vaši pozornost (řízení atd.)
- Nepoužívejte, pokud jste unavení nebo během spánku.
- Není vhodné pro děti, osoby s omezenou motorickou schopností nebo osoby s duševním onemocněním.
- Není vhodné pro osoby s citlivou pokožkou nebo s citlivostí na teplo.
- Nepoužívejte na jizvy nebo na oblasti po chirurgickém zákroku.
- Nepoužívejte, pokud máte poškozenou pokožku, trpíte záněty nebo máte zarudnutou pokožku nebo vyrážku.
- Nepoužívejte, pokud trpíte onemocněním srdce, nádory, onemocněním žil, vysokým tlakem, cukrovkou, horečkami atd.
- Nepoužívejte pro jiné účely, než pro jaké byl přístroj vyroben (masáž krku).
- Přístroj neupravujte ani nemodifikujte.
- Nepoužívejte poškozený nebo opotřebovaný produkt.
- Není vhodné pro těhotné ženy.
- Nabíjejte pod dohledem.

- Nepoužívejte nepřetržitě déle jak 10 min.
- Pouze pro domácí použití, neslouží jako náhrada zdravotní péče.

## SKLADOVÁNÍ

- Skladujte na suchém a stinném místě v originálním obalu.
- Skladujte mimo hořlavé a výbušné předměty.
- Chraňte před ostrými předměty.

## POPIS PRODUKTU

|  |    |                                                                                  |
|--|----|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1. | Tlačítka ovládání                                                                |
|  | 2. | Horní masážní hlavice                                                            |
|  | 3. | Spodní masážní hlavice                                                           |
|  | 4. | Vyhřívání                                                                        |
|  | 5. | Tlačítko vypínače: podržení po dobu 3vteřin vypnutí/spuštění, stisk změna režimu |
|  | 6. | Nabíjecí port                                                                    |
|  | 7. | Vyhřívání                                                                        |
|  | 8. | LED dioda                                                                        |

## POPIS TLAČÍTEK

### TLAČÍTKO VYPÍNAČE

#### Podržení

- Podržením po dobu 3 vteřin spustíte / vypnete produkt.
- Po spuštění se spustí výchozí masáž: masážní režim 1, nízká úroveň vyhřívání
- Výchozí délka masáže: 10 min

#### Stisknutí

- Stiskem v cyklu změníte režim masáže: režim 1 (bílá LED dioda 1x zabliká), režim 2 (bílá LED dioda 2x zabliká), režim 3 (bílá LED dioda 3x zabliká)
- Změna neovlivňuje vyhřívání

### VYHŘÍVÁNÍ


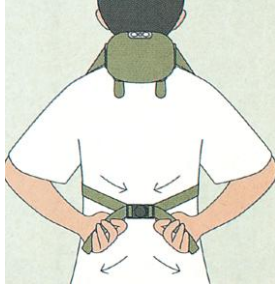
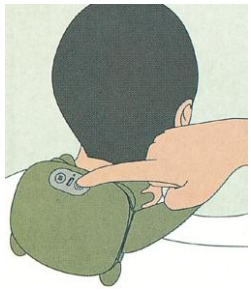
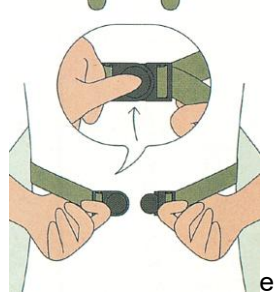
- Stiskem v cyklu změníte intenzitu vyhřívání: nízká intenzita (červená LED dioda 1x zabliká) – vysoká intenzita (červená LED dioda 2x zabliká) – vypnuto (červená LED dioda se vypne)
- Změna neovlivňuje režim masáže

### INDIKÁTOR BATERIE

- Po spuštění svítí indikátor bíle.
- Pokud je stav baterie nízký, bliká červeně.

- Během nabíjení svítí indikátor červeně.
- Po nabití baterie svítí indikátor bíle.

## POUŽITÍ

|                                                                                    |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                             |
| <p>1. Umístěte masážní přístroj za krk na ramena.</p>                              | <p>2. Pomocí přezky a popruhů upevněte za zády. Délka popruhů by měla být stejně dlouhá na obou stranách.</p> |
|  |                            |
| <p>3. Pro spuštění podržte tlačítko vypínače po dobu 3 vteřin.</p>                 | <p>4. Po použití pomocí přezky povolte popruhy a sundejte masážní přístroj.</p>                               |

## FAQ

| Porucha                         | Možná příčina                              | Možná oprava                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nelze spustit                   | Slabá baterie                              | Nabijte baterii                            |
|                                 | Nabíjení                                   | Nelze spustit během nabíjení               |
|                                 | Produkt nebyl spuštěn                      | Podržte tlačítko vypínače po dobu 3 vteřin |
| Nelze nabít                     | Kabel nebo adaptér nejsou správně zapojeny | Znovu zapojte                              |
|                                 | Zkrat základní desky                       | Kontaktujte servisní oddělení              |
| Přístroj se vypne během provozu | Slabá baterie                              | Nabijte                                    |
|                                 | Uběhla výchozí doba provozu                | Znovu spusťte                              |
| Intenzita masáže se snížila     | Slabá baterie                              | Nabijte                                    |
| Vyhřívání nefunguje             | Vyhřívání není spuštěno                    | Stiskněte tlačítko vyhřívání               |

## SPECIFIKACE

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Model: N7           | Jmenovitý výkon: 10W       |
| Jmenovitý vstup: 5V | Kapacita baterie: 2000 mAh |

## ČIŠTĚNÍ

Před čištěním vypněte a vypojte z nabíječky. Čistěte pomocí suchého hadříku. Odolné nečistoty očistěte pomocí navlhčeného hadříku a poté osušte pomocí suchého hadříku. Nepoužívejte, dokud není přístroj suchý.

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

### Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

### Záruční podmínky

#### Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

#### Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

**Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):**

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

## **Reklamační řád**

### **Postup při reklamaci vady zboží**

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ**  
**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,  
109 00, Praha 10, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

**Reklamace zboží**



**SK**  
**Stores inSPORTline SK, s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín  
911 01, SK

IČO: 46259317  
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

**Vrácení a výměna zboží do 30 dnů**

