



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 31394 EMS masážní podložka na krk inSPORTline Elixon

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Elektrody mohou způsobit iritaci pokožky nebo zvýšit citlivost pokožky, a to z důvodu elektrické stimulace nebo použití vodivého gelu. Pokud tak nastane, okamžitě ukončete provoz a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Osoby s onemocněním srdce nebo epilepsií, nebo podezřením na dané onemocnění, nesmí produkt používat.
- Elektrody neumisťujte na: otevřené rány, vyrážky, nateklé oblasti, zarudlou pokožku, oblast trpící infekcí, záněty a jiná poranění pokožky.
- Elektrody neumisťujte na oblasti s kovovými implantáty.
- Nepoužívejte během spánku.
- Pokud trpíte komplikacemi během menstruace nebo jste po porodu, poraďte se o použití s lékařem.
- Nepoužívejte, pokud jste v nedávné době prodělali chirurgický zákrok.
- Není vhodné pro děti.
- Zařízení nepoužívejte nebo nepřenášejte do oblastí s MRI, CT, přístroji využívající elektromagnetické nebo sonické vlny, přes detektory kovů a podobné oblasti.
- Produkt neupravujte, nemodifikujte ani sami neopravujte.
- Nepoužívejte, pokud využíváte kardiostimulátor nebo jiné elektronické zdravotnické zařízení.
- Nepoužívejte v místnostech s vysokou vlhkostí jako jsou koupelny, sprchové kouty, bazény aj.
- Elektrody nepoužívejte během koupele.
- Elektrody nepoužívejte v následujících případech: těhotenství, nebo podezření na těhotenství.
- Elektrody neumisťujte na šperky, piercingy a jiné kovové předměty umístěny na těle.
- Nepoužívejte v místnostech s hořlavými nebo výbušnými plyny.
- Před použitím se poraďte s lékařem, pokud jste osoby s onemocněním srdce, nebo s vyšší citlivostí na srdeční arytmií.
- Před použitím se poraďte s lékařem, pokud navštěvujete rehabilitační centrum.
- Před použitím se poraďte s lékařem i tehdy, pokud trpíte onemocněním nebo úrazem, které není vyjmenováno v manuálu.

- Pokud pociťujete nevolnost, bolest hlavy, případně ztrátu vědomí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Produkt je vhodný pro použití zdravé osoby. Produkt je vhodný pouze pro dospělé osoby se zdravou pokožkou.
- Zarudnutí pokožky po použití je běžné, pokud zmizí do 30 min od použití. Pokud zarudnutí nezmizí do 30 min, elektrody na danou oblast nepoužívejte, dokud zarudnutí nezmizí.
- Pokud se po použití objeví dlouhodobá iritace pokožky, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pravidelně kontrolujte oblast použití.
- Zařízení neslouží jako náhrada profesionální lékařské péče.
- Vhodné pro domácí použití.
- Automatický časovač: 15 min




POPIS PRODUKTU

	1. Tlačítko +
	2. Intenzita EMS
	3. Hlavní vypínač / přepnutí funkce
	4. Tlačítko -
	5. Vyhřívané EMS elektrody
	6. Masážní hlavice
	7. Magnety
	8. USB-C nabíjecí port
	9. USB-C nabíjecí kabel

NABÍJENÍ

- Připojte nabíjecí kabel do přístroje.
- Připojte nabíjecí kabel do nabíjecího adaptéru (doporučujeme adaptér o výkonu 5V / 1A a více).
- Během nabíjení bliká dioda červeně, jakmile je přístroj nabitý, svítí zeleně.

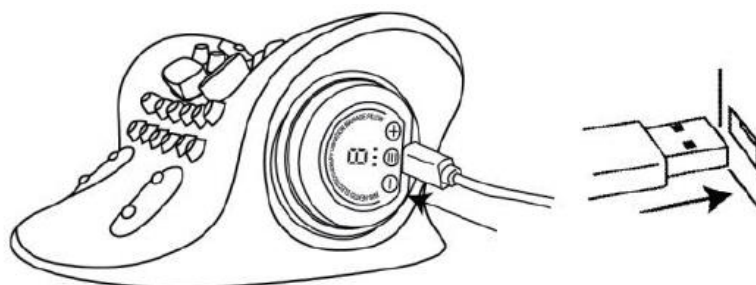


Po spuštění je možné přístroj ovládat pomocí ovladače.



	<p>1. Číselný ukazatel</p> <p>2. Tlačítko +</p> <p>3. Stupeň vyhřívání</p> <p>4. EMD/Vyhřívání/Vibrace</p> <p>5. Vypínač</p> <p>6. Tlačítko -</p>
--	---

- Podržte tlačítko vypínače po dobu 3 vteřin.
- Rozsvítí se indikátor nastavení intenzity EMS masáže. Na výběr je 6 stupňů intenzity (0 vypnuto). Pro lepší funkci EMS masáže, navlhčete krk nebo elektrody vlažnou vodou.
- Stiskněte tlačítko vypínače pro nastavení vyhřívání. Na výběr jsou 3 stupně intenzity. Varování: vždy sledujte reakci těla na teplotu, hrozí riziko popálenin.
- Stiskněte tlačítko vypínače pro nastavení vibrací. Na výběr jsou 3 stupně intenzity.
- Přístroj se automaticky vypne po 15 min provozu. Funkci vyhřívání nepoužívejte dlouhodobě v nepřetržitém provozu.
- Všechny funkce lze používat společně nebo zvlášť.
- Přístroj je možné používat nezávisle na orientaci.

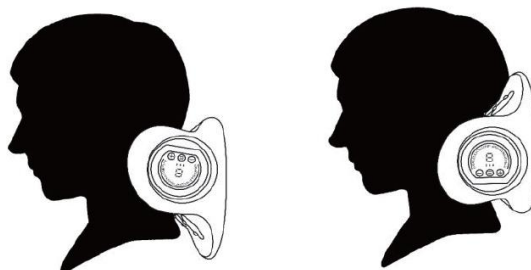

ÚDRŽBA

- Údržba EMS elektrody: Čistěte pomocí jemného hadříku, navlhčeném v roztoku vlažné vody a neutrálního čistícího prostředku. Poté osušte pomocí suchého hadříku.
- Nikdy zařízení neponořujte do vody a nedovolte, aby voda vnikla do těla přístroje.
- K čištění nepoužívejte agresivní čistící prostředky, rozpouštědla, nebo čističe na bázi alkoholu nebo benzínu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnese na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebenění brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

