



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

**IN 28888 Elektrický invalidní vozík inSPORTline Hawkie II
700W**



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	5
VYBALENÍ A PRVNÍ PŘÍPRAVA	5
OPĚRKA RUKOU A NOHOU	7
OVLÁDACÍ JOYSTICK	7
OVLÁDACÍ PANEL A JOYSTICK	8
DÁLKOVÝ OVLADAČ	9
POPIS OVLADAČE	9
PÁROVÁNÍ OVLADAČE	9
RUČNÍ BRZDA	10
SLOŽENÍ	11
ODPOJENÍ BATERIE	11
BATERIE	11
NABÍJENÍ BATERIE	12
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ	13
SPECIFIKACE	13
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	14
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	14

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Produkt nepoužívejte, pokud se na něm objeví ostré hrany.
- V případě poruchy okamžitě ukončete provoz a kontaktujte servis. Vozík sami neopravujte.
- Před použitím se naučte přístroj používat, vyhledejte bezpečný a otevřený prostor a vyhledejte pomoc druhé osoby do doby, než budete přístroj bezpečně používat.
- Před nasednutím a vysednutím se ujistěte že je produkt vypnutý.
- Vždy mějte nastavenou a jezděte takovou rychlostí aby jste neohrožovali sebe nebo ostatní osoby a jejich majetek.
- Doporučujeme vždy začínat na nejnižším rychlostním stupni.
- Některé komunikační zařízení mohou operovat na stejné frekvenci jako dálkový ovladač vozíku. Pokud máte jakýkoliv takové zařízení u sebe (telefon aj.) vždy nejprve vyzkoušejte že nebude zasahovat do ovládání.
- Některé transmitery mohou narušit dálkové ovládání vozíku.
- Pokud pozorujete jakýkoliv nežádoucí pohyb, nebo se vozík náhle zastaví, okamžitě jej vypněte.
- Nezasahujte, neupravujte a nemodifikujte produkt.
- Pokud nastane jakákoliv popsání situace okamžitě vypněte vozík: náhlý pohyb bez zadání uživatele, směr jízdy se nedá ovládat, selhání brzd.
- Vozík je určen pro přepravu jedné osoby.
- Nejezděte do příliš příkrých kopců.
- Nejezděte pod vlivem drog, léků a alkoholu.
- Za vozík nepřipevňujte další vozidla nebo předměty.
- Vozík nesmíte připojovat za další vozidla.
- Nepřekračujte maximální povolené stoupání.
- Nepohybujte náhle joystickem, pokud je vozík v pohybu.
- Nikdy nevozte na vozíku druhé osoby a nepřekračujte maximální povolenou nosnost vozíku.
- Pokud je vozík v běžném pohybu, nevypínejte jej, můžete poškodit motor nebo ovládání. Vozík vypínejte v pohybu POUZE pokud nad ním ztratíte kontrolu.
- Nejezděte po povrchu, který není zpevněný (písek, hluboká tráva, jemná hlína atd.)
- Nejezděte po schodech.
- Před čistěním a údržbou se ujistěte, že je vozík vypnutý.
- Vozík nezapínejte, pokud na něm nesedíte.
- Vozík není určen pro běžný silniční provoz. Jezděte pouze po komunikacích pro něj určených (chodník).
- Neměňte náhle směr jízdy (dopředu – dozadu). Směr jízdy měňte v moment, kdy se vozík zastaví.
- Z kopce vždy jezděte na nejnižší rychlost, joystick nechte ve střední poloze.
- Vždy mějte chodidla umístěna na opěrce nohou.

- Před jízdou se ujistěte, že je baterie plně nabitá.
- Vozík nabíjejte v dobře větrané místnosti.
- Před jízdou zkontrolujte utáhnutí a správné složení křesla.
- Před couváním se ujistěte, že za Vámi není žádná překážka. Couvejte na nejnižší rychlost.
- Vyhněte se sporadickým pohybům a náhlým změnám směru jízdy.
- Ruce a nohy mějte umístěny na opěrkách.
- Nejezděte přes překážky vyšší jak 5 cm.
- Nejezděte přes mezery delší jak 10 cm.
- Maximální stoupání je 12°.
- Pokud jedete v kopci, necouvejte.
- Nejezděte po povrchu, který je nakloněn více jak 3° do strany.
- Nejezděte na měkkém, nerovném nebo nezajištěném povrchu (tráva, štěrk).
- Před jízdou z kopce nastavte nejnižší rychlost, jízdou na kopci se prodlužuje brzdná dráha.
- Nejezděte skrz nerovnosti jako jsou patníky aj.
- Nejezděte ve vodě, po ledu nebo sněhu, nebo zhoršených viditelných podmínkách.
- Nenechávejte vozík vystavený přímému slunečnímu svitu a vlivu počasí.
- Chraňte před deštěm a vodou.
- Ovládací panel není voděodolný.
- Pravidelně kontrolujte stav pneumatik. Opotřebené okamžitě vyměňte.
- Nejezděte za deště nebo po mokré vozovce. Hrozí poškození elektroniky a baterie.
- Dálkový ovladač je napájen 2x AAA bateriemi
- Celková nosnost: 130 kg
- Dálkové ovládání až na 15 m (záleží na okolních podmínkách)
- Maximální rychlost až 6 km/h při optimálních podmínkách
- Maximální dojezd až 24 km při optimálních podmínkách
- Vozík je poháněn 2x 350W motory
- K nabíjení baterie používejte jen originální nabíječku.
- Nepoužívejte nabíječku, je-li poškozena.
- Nenabíjejte baterii bez dozoru.
- Nenabíjejte baterii, je-li poškozena nebo pokud se do ní dostala voda.
- Baterii nabíjejte v dobře větraném prostoru, mimo dosah osob, kde nejsou hořlavé materiály a nehrozí riziko požáru.
- Baterie by rozhodně neměla být vystavena vodě, vlhkosti a je potřeba se vyhnout přímému proudu vody.

POPIS PRODUKTU



1.	Pěnové madlo	7.	Skladovací prostor
2.	360° ovládací joystick	8.	Odnímatelná baterie
3.	Prodyšné sedadlo	9.	13" zadní kola
4.	Tlumiče	10.	Boční kapsy
5.	Hliníková opěrka nohou	11.	Výškově nastavitelné opěrky rukou
6.	8" přední kola	12.	Nastavitelná opěrka zad

VYBALENÍ A PRVNÍ PŘÍPRAVA

Vytáhněte židli a všechny komponenty, ujistěte se, že jsou všechny části přítomny.



Připevněte joystick na pravou stranu madla.



Uchopte opěrku zad a rozložte vozík.



Zajistěte jistící přezku (zajistěte svorku ve tvaru U)



OPĚRKA RUKOU A NOHOU

Polohu opěrky rukou můžete upravit pomocí tlačítka nebo vytahovacího pinu.

Polohu opěrky nohou můžete upravit pomocí šroubu ve třech výškách.




OVLÁDACÍ JOYSTICK



1.	Ukazatel	5.	Klakson
2.	Vypínač	6.	Zvýšení rychlosti
3.	Zobrazení rychlostního stupně	7.	360° ovládací joystick
4.	Snížení rychlosti		

Po prvním spuštění vyzkoušejte základní pohyby křesla na nejnižší rychlost.

Po zvládnutí základních pohybů, vyzkoušejte pohyby do stran a zatáčení.


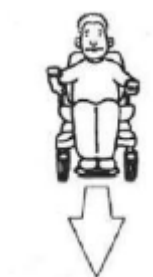


OVLÁDACÍ PANEL A JOYSTICK

Ovládací panel s joystickem připevněte na pravou stranu madla.

Pomocí matice nastavte požadovanou vzdálenost.


Připevněte pravý a levý port motoru s baterií.

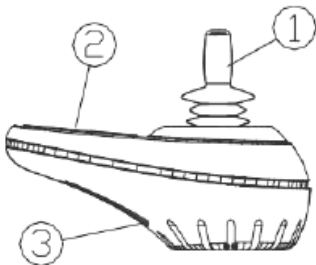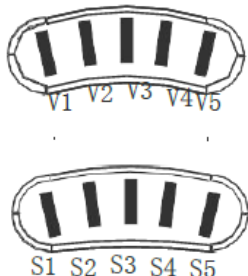Ovládací panel	Boční pohled ovládání	Napájecí porty
		

Ovládací panel chraňte proti nárazům a fyzickému poškození. Před jízdou zkontrolujte všechna připojení a zda ovládací panel a joystick reagují na vaše příkazy.

Dlouhodobě nevystavujte ovládací panel a vozík ve vlhkém prostředí. Chraňte ovládací panel proti znečištění.

Pokud je potřeba ovládací panel očistit, navlhčete hadřík a opatrně nečistoty setřete. Dávejte pozor, aby se voda nedostala do ovládacího panelu. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.

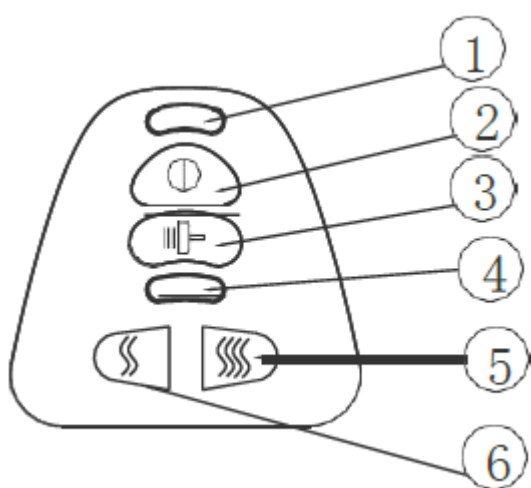

1. Ukazatel kapacity baterie

2. Vypínač

3. Klakson

4. Zobrazení rychlostního stupně

5. Zvýšení rychlosti

6. Snížení rychlosti

Tlačítko vypínače slouží pro spuštění / vypnutí vozíku. V případě nouzové situace, lze tlačítko použít pro nouzové vypnutí.

Ukazatel baterie zobrazuje aktuální stav baterie.

Po spuštění se indikátory rozsvítí, po vypnutí indikátory zhasnou.

Joystick slouží pro ovládání pohybu vozíku. Čím více je joystick vychýlený od středu, tím vyšší bude rychlost. Pokud joystick pustíte, navrátí se do středu a pohyb se zastaví.

Ukazatel rychlosti ukazuje rychlostí stupeň v 5 segmentech: 1 (nejnižší) – 5 (nejvyšší).

Pokud stisknete tlačítko klaksonu, ozve se zvukový signál.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

Dálkový ovladač je napájen 2x AAA bateriemi.

Ovladač je připojen pomocí frekvenčního přijímače 2.4 GHz.

POPIS OVLADAČE



1.	Joystick
2.	Napájecí tlačítko
3.	Snížení rychlosti
4.	Bez funkce
5.	Bez funkce
6.	Bez funkce
7.	Zvýšení rychlosti
8.	Klakson
9.	Bez funkce

PÁROVÁNÍ OVLADAČE

Ovladač je spárovaný z výroby, pokud by bylo potřeba ovladač spárovat, následujte kroky níže:



Pomocí vypínače spustíte ovládací panel vozíku.



Po dobu 5 vteřin podržte tlačítko dálkového ovladače.



Podržte tlačítko pro snížení rychlosti, dokud tlačítko vypínače nepřejde do červené barvy.



Na ovládacím panelu vozíku podržte tlačítko pro navýšení rychlosti, dokud se nerozsvítí prostřední dioda. Poté okamžitě stiskněte tlačítko klaksonu.



LED ovladače zhasnou, poté stiskněte tlačítko vypínače dálkového ovladače.
Spustíte ovládací panel vozíku.



Spárování bylo úspěšné.

RUČNÍ BRZDA

Zadní kola jsou vybavena ruční brzdou. Pokud je brzda v „manual“ poloze, je možné vozík tlačit jako běžný invalidní vozík.



VAROVÁNÍ: Vozík tlačte pouze tehdy, pokud nelze využít motor. Pro tlačení vozíku je nutné nejprve přepnout ruční brzdu do „manual“ polohy.

SLOŽENÍ

Otočte knoflíkem dolů pro uvolnění opěrek rukou.



Pro uvolnění zadního rámu povolte přezku.


Uchopte sedadlo a zadní madlo a složte vozík.



ODPOJENÍ BATERIE

Vypojte napájecí kabel.

Zatáhněte za pojistku a vytáhněte baterii.

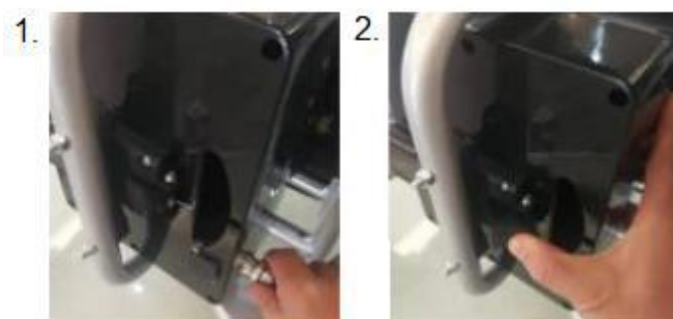

BATERIE

Vozík používá 24 V 12 Ah lithiovou baterii. Baterii měňte pouze v autorizovaném servise.

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70 % své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

V současné době jsou nejpoužívanější baterie lithium iontové (Li-ion). Výhoda těchto baterií je především v nízké hmotnosti a dlouhé životnosti. Li-ion baterie mají velmi nízké samočinné vybíjení. Od prvního nabití je potřeba baterii udržovat stále v jejím pracovním cyklu (vybití/nabití), i při nepoužívání baterie dochází k jejímu samovolnému vybíjení, které je přirozené. Baterii doporučujeme pravidelně dobíjet i v případě nepoužívání vozíku cca 1x za měsíc a skladovat nabitě na 60 – 80% kapacity. V opačném případě může dojít k poškození baterie, které může způsobit kratší dojezd nebo v horším případě úplnou nefunkčnost. Pravidelným dobíjením prodlužujete životnost baterie. Před prvním použitím doporučujeme provést plné nabití baterie. Jelikož baterie nemají paměťový efekt, je možné je dobíjet kdykoli. Baterii udržujte v nabitěm stavu a dobíjejte vždy po jízdě, nikoliv až před následující jízdou.

Pro správnou funkčnost a bezpečné použití baterie se řiďte instrukcemi v manuálu. Pokud je baterie poškozená, uniká z ní kapalina nebo abnormální zápach přestaňte baterii ihned používat.

- Životnost baterie je limitována. Pokud používáte baterii, která přesahuje běžnou životnost, tak se může zvýšit frekvence nabíjení a snížit dojezd vozíku.
- Baterii neotvírejte ani nevhazujte do ohně. Do baterie nekládejte cizí předměty.
- Nedotýkejte se baterie kovovými předměty. Baterie může explodovat nebo být poškozená.
- Ideální teplota pro nabíjení baterie je +10 °C až +30 °C.
- Pokud baterii používáte po delší dobu, bude její teplota vyšší. Toto je běžný stav baterie.
- Pokud používáte baterii v chladném prostředí, její dojezd je nižší.
- Baterii sami neopravujte ani neupravujte.

NABÍJENÍ BATERIE

Baterie je nabíjena AC 110 – 240V 50 – 60 Hz, výstup 24V, 2Ah nabíječkou.

Před prvním použitím nabijte baterii. Poté baterii vybijte používáním, nejezděte rychle a příliš se nevzdalujte od místa bydliště, dokud nebudete vozík umět ovládat. Poté znovu nabíjejte baterii po dobu 8 – 14 hodin. Po 4 – 5 nabíjecích cyklech je kapacita baterie využívána na 100 %.

Inteligentní nabíječka dodávaná k vozíku automaticky nabíječku odpojí, pokud je baterie nabitá na 100% - má ochranu proti přebití. Z důvodu bezpečnosti nedoporučujeme nechat vozík připojený k nabíječce po úplném nabití baterie.

Nabíječku během nabíjení nikdy nepřikrývejte, jinak hrozí její poškození.

Nabíječka se může poškodit díky abnormálnímu vystavení vodě, nárazům apod. V tomto případě se na ní nevztahuje záruční lhůta. Nabíjejte vždy jen vypnutý vozík.

Nikdy nenabíjejte baterii jinou nabíječkou, než tou, která k vozíku patří! Jinak je zde vážné riziko poškození či zničení baterie. Naše společnost nezodpovídá za zničení baterie či nabíječky pokud tento pokyn nebudete dodržovat.

Postup při nabíjení

1. Odejměte ochrannou krytku nabíjecího konektoru (zásuvky) a zasuněte do ní konektor (zástrčku) nabíječky.
2. Připojte nabíječku do elektrické sítě (230 V).
3. Proces nabíjení je funkční, pokud LED světlo na nabíječce svítí červeně. Po nabití baterie se LED světlo rozsvítí zeleně.
4. Po nabití baterie odpojte nabíječku z elektrické sítě a konektor nabíječky (zástrčku) z konektoru vozíku (zásuvky).
5. Pečlivě zavřete nabíjecí konektor na vozíku ochrannou krytkou.

Při nabíjení mějte nabíjenou baterii vždy pod dohledem. Nabíjení baterie při nižších teplotách než 10°C a vyšší než 40°C může baterii vážně poškodit. V případě poškození nabíječky (nebo přívodního kabelu) ji nikdy nepřipojujte do el. sítě. Před nabíjením musí být vozík vypnutý.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- K čištění používejte pouze vlhký hadřík a jemný čistící prostředek. Nepoužívejte agresivní čistící prostředky.
- Po očištění všechny vlhké části řádně osušte, obzvláště pokud jste čistili ovládací panel.
- Ovládací panel chraňte proti vniknutí vody.
- Pravidelně kontrolujte stav a připojení kabelů.
- K čištění nepoužívejte vysokotlaké čističe.
- Vozík skladujte na dobře ventilovaném místě, mimo vlhké prostředí.

SPECIFIKACE

Maximální dojezd	24 km
Nosnost	130 kg
Motor	700W (2x 24V/350W)
Baterie	24V/12 Ah, lithiový akumulátor, modul baterie je odnímatelný
Nabíječka	2 A
Max. rychlost	6 km/h
Max. stoupání	12°
Brzdy	elektromagnetické
Vyztužený rám	ano
Velikost kol	přední 2 x 8" (100x50 mm), zadní 2 x 12,5x2,25"
Typ předních kol	bezdušová pevná
Typ zadních kol	nafukovací
Doporučený tlak pneumatik	250-280 kPa (2,5-2,8 bar)
Rozměry	d 90 x š 63 x v 95 cm
Rozměry ve složeném stavu	d 80 x š 68 x v 42 cm
Rozměry sedátka	46 x 46 cm, tloušťka 6 cm
Výška sedátka od země	44 cm (bez sedáku)/50 cm (se sedákem)
Vzdálenost opěrky rukou od sedátka	30 cm (bez sedáku)/24 cm (se sedákem)
Výška zádové opěrky	57 cm (bez sedáku)/50 cm (se sedákem)
Rozměry podpěry nohou	30 x 20,5 cm
Světlá výška	6 cm
Poloměr otáčení	60 cm
Hmotnost	25,2 kg (bez baterie) / 27,95 kg (s baterií)

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou

- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/víčekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR

Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01

Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264

DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970

Mail: eshop@insportline.cz

reklamace@insportline.cz

servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317

DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098

Mail: objednavky@insportline.sk

reklamacie@insportline.sk

servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Dovozce:

Seven sport s.r.o.,
Kutnohorská 531
Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10
IČ: 268 47 264
Czech republic

prohlašuje na vlastní zodpovědnost, že
výrobek: IN 28888 Electric Wheelchair inSPORTline Hawkie II 700W (W5521)
je ve shodě
s technickými požadavky na výrobek stanovenými nařízením vlády

Výrobek splňuje (EU)2017/745 a následující normy:

(EU) 2017/745	EN ISO 14971:2019
EN ISO 15223-1:2021	EN ISO 20417:2021
EN ISO 10993-1:2020	EN ISO 10993-5:2009
EN ISO 10993-10:2013	EN12184:2014
EN 60601-1-2:2015/A1:2021	ISO 7176
EN 60601-1:2006/A2:2021	

MSDS / TCT221212M105 / 1.1.2023 (UN3480, UN3481, UN3171)

Výrobce:

ZheJiang J&J Mobility Co., Ltd
#18, Baiyang Street, WuyiJinhua City, ZheJian. China

Vítkov, 2025



SEVEN SPORT s.r.o.
Roman Košťál, jednatel společnosti