



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN APL-MS008CS Digitální mikroskop Apexel 400X-800X s LCD displejem

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

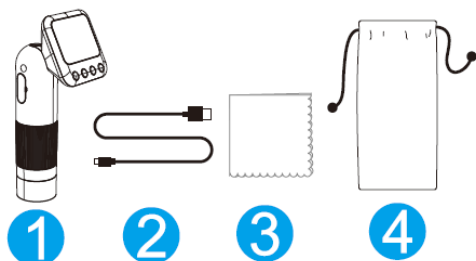

1. Digitální mikroskop
2. USB-C kabel (přenos dat, nabíjení)
3. Čistící hadřík
4. Přenosný vak

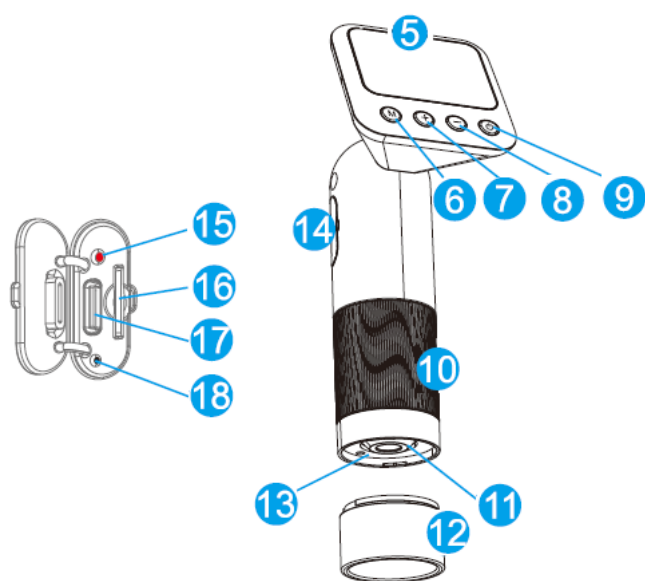

5. Displej – zobrazení předmětu (přiblížení 1x ~ 5x). Snímek displeje můžete uložit nebo nahrát. Zobrazení jasu a osvětlení.

6. Tlačítko M

7. Tlačítko +

8. Tlačítko -

9. Tlačítko napájení

10. Zaostření – pomocí kroužku můžete zaostřit předmět

11. Objektiv – vizuálně zvětšuje předmět

12. Sklíčko – slouží pro sledování předmětu

13. LED kroužek – slouží k osvětlení sledovaného předmětu

14. Výstupní port – USB-C port pro nabíjení a přenos dat. Port zakryjte pomocí krytky pokud není používán.


15. Nabíjecí indikátor

16. TF slot pro kartu

17. USB-C port

18. Reset

POUŽITÍ

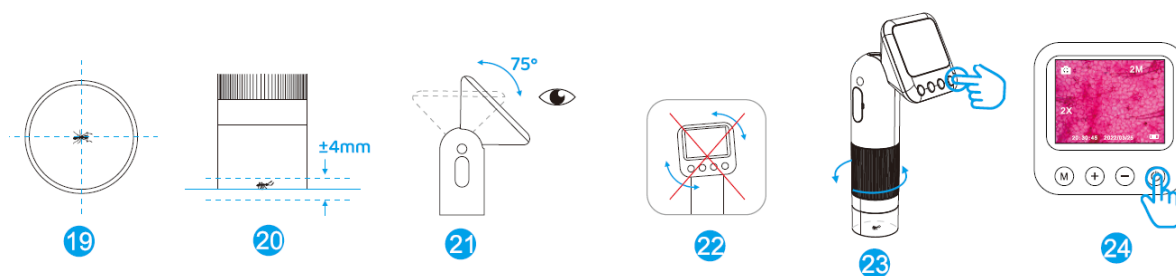

Kontrola mikroskopu

Podržte tlačítko (9.) pro spuštění displeje.

Podržte tlačítko (7.) pro spuštění světla. Krátkým stiskem (7. / 8.) změníte přiblížení. Podržením tlačítka (8.) světlo vypnete.


Začněte pozorovat

Zamířte mikroskop na předmět a ujistěte se, že je vycentrován (19.). Výška od sklíčka by měla být $\pm 4\text{mm}$ (20.).

Upravte úhel displeje podle vaší potřeby (21.). Displej je možné polohovat v úhlu 75° , jinak můžete poškodit uchycení (22.).

Opatrně zaostřujte obraz a sledujte změny. Fotografie nebo video můžete zaznamenat pomocí tlačítek (23. / 24.).

Ovládání

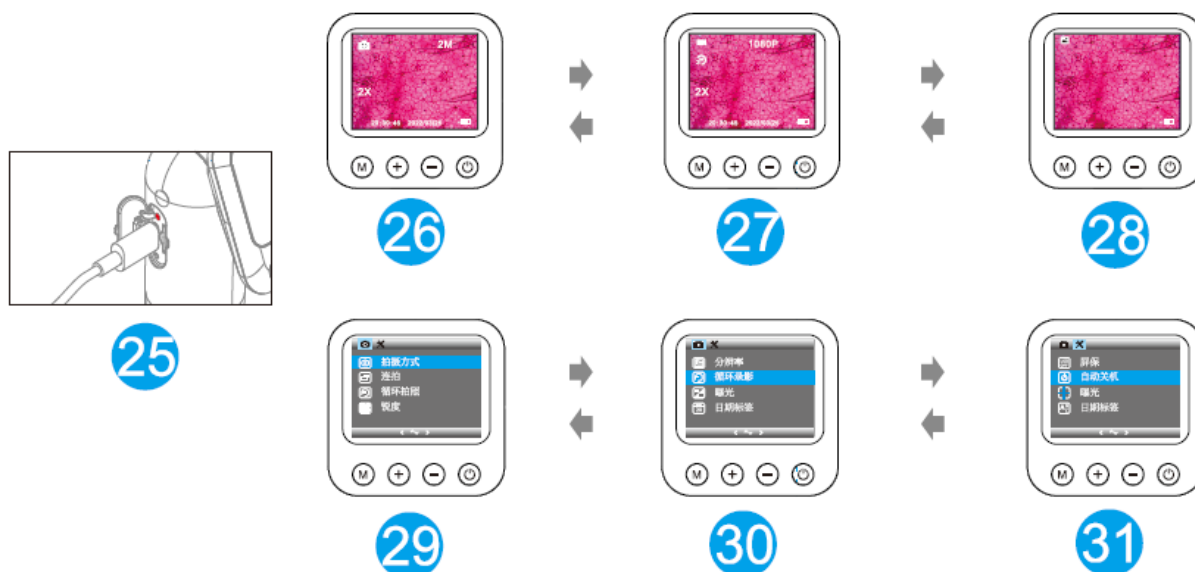

Stiskem tlačítka vypínače (9.) po dobu 2 vteřin spustíte / vypnete mikroskop.

Pořízení fotografie / videa a jejich přehrání

Stiskem tlačítka (6.) přepínáte mezi režimy (26. / 27. / 28.).

Během pořizování fotografie / videa, stiskem tlačítka přiblížíte (7.) nebo oddálíte (8.) snímek, stiskem tlačítka vypínače, pořídíte fotografii / video.

Podržením tlačítka (7.) zvýšíte jas, podržením tlačítka (8.) snížíte jas. Podržením tlačítka (6.) vstoupíte do nastavení (29. / 30. / 31.).

Přehrávání fotografií / videí

Stiskem tlačítek (7.) a (8.) můžete vybírat snímky, stiskem (9.) přehrajete. Během přehrávání stiskem tlačítek (7.) a (8.) ovládáte video.

Podržení tlačítka (6.) soubor vymažete.

Po vstupu do menu, stiskem tlačítka (6.) přepínáte mezi nastavením (foto / video / obecné), stiskem tlačítek (7.) a (8.) procházíte nabídku. Nabídku vyberete stiskem tlačítka vypínače. Stiskem tlačítka (6.) se vrátíte zpátky.

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 26. Rozhraní fotografií | 27. Rozhraní videa | 28. Přehrávání |
| 29. Rozhraní nastavení fotek | 30. Rozhraní nastavení videí | 31. Rozhraní nastavení |

DALŠÍ INFORMACE

Nabíjení

Nabíjejte pomocí USB-C portu a adaptéru. Doba nabití jsou cca 2 hodiny, doba použití na jedno nabití jsou cca 2 hodiny. Během nabíjení svítí červená dioda, po nabití svítí zelená dioda.

FAQ

Porucha	Příčina	Řešení
Mikroskop se nespustí	Vybitá baterie	Nabijte
Obraz není jasný a je temný	Světlo není spuštěno	Zapněte světlo
Systém se zaseklul	Stiskněte restart tlačítko	Pomocí úzkého předmětu stiskněte restart tlačítko
Obraz není ostrý	Špatně zaostřeno, znečištěný povrch	Zkontrolujte zaostření, očistěte
Displej je příliš jasný	Nesprávně nastaveno	V nastavení upravte jas

- Čistěte pomocí jemného a suchého hadříku.
- Pro připojení k počítači navštivte adresu: www.apexellens.com
- Skladujte na stinném a chladném místě.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnese na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamační dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídí reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**CZ
SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729
Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamace zboží





Vrácení a výměna zboží do 30 dnů



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN APL-MS008CS Digitálny mikroskop Apexel 400X-800X s LCD displejom

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu používateľskej príručky.

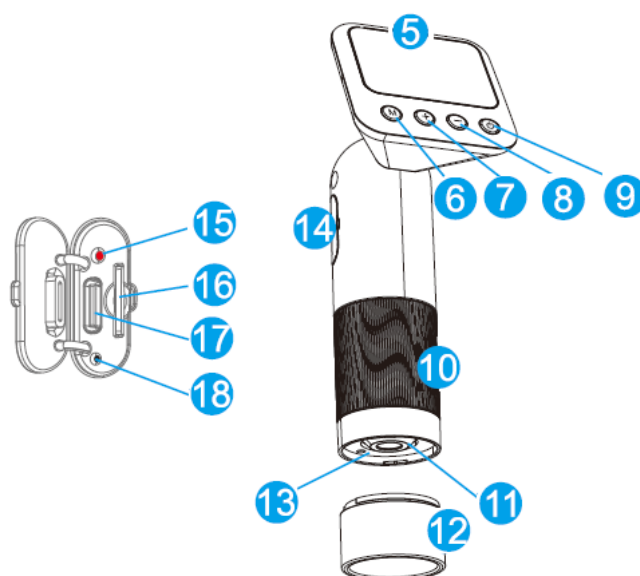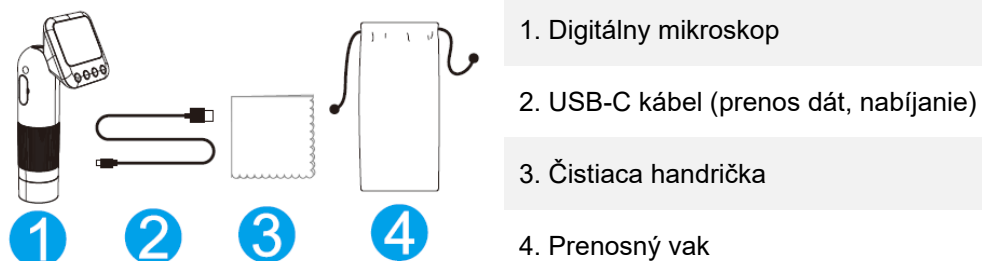

5. Displej – zobrazenie predmetu (priblíženie 1x ~ 5x). Snímku displeja môžete uložiť alebo nahráť.

6. Tlačidlo M

7. Tlačidlo +

8. Tlačidlo -

9. Tlačidlo napájania

10. Zaostrenie – pomocou krúžku môžete zaostriť predmet

11. Objektív – vizuálne zväčšuje predmet

12. Sklíčko – slúži na sledovanie predmetu

13. LED krúžok – slúži na osvetlenie sledovaného predmetu

14. Výstupný port – USB-C port pre nabíjanie a prenos dát. Port zakryte pomocou krytky pokiaľ nie je používaný.


15. Nabíjací indikátor

16. TF slot pre kartu

17. USB-C port

18. Reset

POUŽÍVANIE

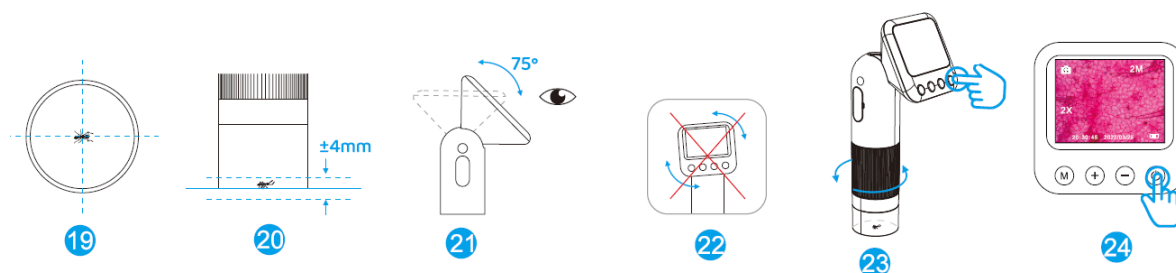

Kontrola mikroskopu

Podržte tlačidlo (9.) pre spustenie displeja.

Podržte tlačidlo (7.) pre spustenie svetla. Krátkym stlačením (7. / 8.) zmeníte priblíženie. Podržaním tlačidla (8.) svetlo vypnete.


Začnite pozorovať

Zamierte mikroskop na predmet a uistite sa, že je vycentrovaný (19.). Výška od sklíčka by mala byť $\pm 4\text{mm}$ (20.).

Upravte uhol displeja podľa Vašej potreby (21.). Displej je možné polohovať v uhle 75° , inak môžete poškodiť uchytenie (22.).

Opatrne zaostrujte obraz a sledujte zmeny. Fotografiu alebo video môžete zaznamenať pomocou tlačidiel (23. / 24.).

Ovládanie

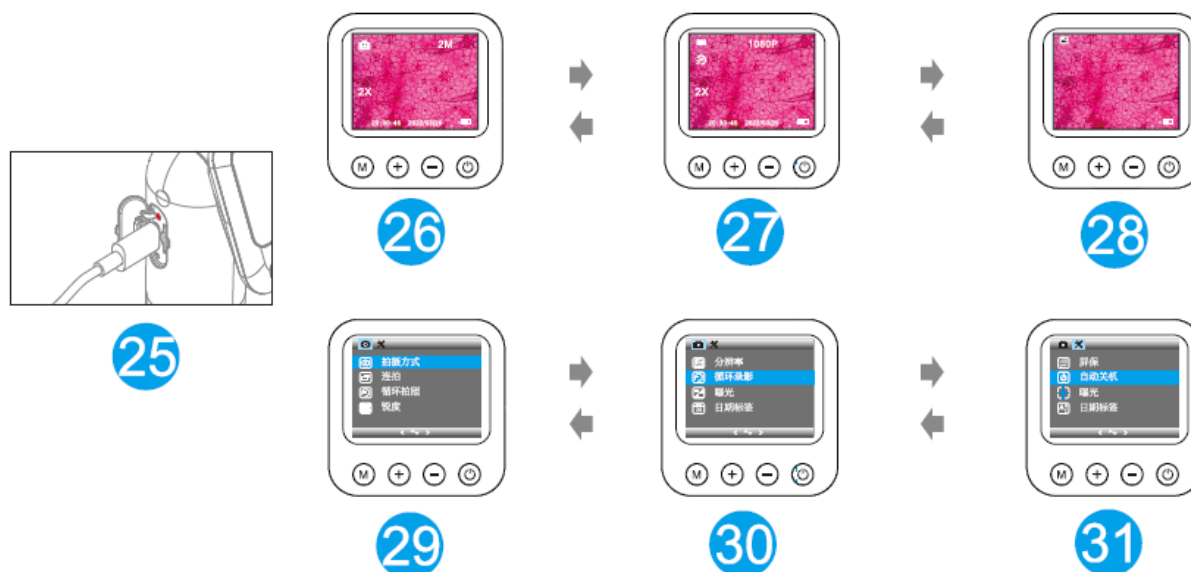

Stlačením tlačidla vypínača (9.) po dobu 2 sekúnd spustíte / vypnete mikroskop.

Vytvorenie fotografie / videa a ich prehranie

Stlačením tlačidla (6.) prepínate medzi režimami (26. / 27. / 28.).

Počas zhotovovania fotografie / videa, stlačením tlačidla priblížite (7.) alebo oddialíte (8.) snímku, stlačením tlačidla vypínača, vytvoríte fotografiu / video.

Podržaním tlačidla (7.) zvýšite jas, podržaním tlačidla (8.) znížite jas. Podržaním tlačidla (6.) vstúpíte do nastavenia (29. / 30. / 31.).

Prehrávanie fotografií / videí

Stlačením tlačidiel (7.) a (8.) môžete vyberať snímky, stlačením (9.) prehráte. Počas prehrávania stlačením tlačidiel (7.) a (8.) ovládate video.

Podržaním tlačidla (6.) súbor vymažete.

Po vstupe do menu, stlačením tlačidla (6.) prepínate medzi nastavením (foto / video / všeobecné), stlačením tlačidiel (7.) a (8.) prechádzate ponuku. Ponuku vyberiete stlačením tlačidla vypínača. Stlačením tlačidla (6.) sa vrátite späť.

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 26. Rozhranie fotografií | 27. Rozhranie videa | 28. Prehrávanie |
| 29. Rozhranie nastavenia fotiek | 30. Rozhranie nastavenia videí | 31. Rozhranie nastavení |

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Nabíjanie

Nabíjajte pomocou USB-C portu a adaptéra. Doba nabitia sú cca. 2 hodiny, doba použitia na jedno nabitie sú cca. 2 hodiny. Počas nabíjania svieti červená dióda, po nabití svieti zelená dióda.

FAQ

Porucha	Príčina	Riešenie
Mikroskop sa nespustí.	Vybitá batéria.	Nabite.
Obráz nie je jasný a je temný.	Svetlo nie je spustené.	Zapnite svetlo.
Systém sa zasekol.	Stlačte reštart tlačidlo.	Pomocou úzkeho predmetu stlačte reštart tlačidlo.
Obráz nie je ostrý.	Zle zaostrené, znečistený povrch.	Skontrolujte zaostrenie, očistite.
Displej je príliš jasný.	Nesprávne nastavené.	V nastavení upravte jas.

- Čistite pomocou jemnej a suchej handričky.
- Pre pripojenie k počítaču navštívte adresu: www.apexellens.com
- Skladujte na tienistom a chladnom mieste.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.

- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru




Vrátenie a výmena tovaru




USER MANUAL – EN

IN APL-MS008CS Digital microscope Apexel 400X-800X with LCD display

SevenSport s.r.o. reserves the right to make any changes and improvements to its product without prior notice. Visit our website www.insportline.eu where you will find the latest version of the manual.

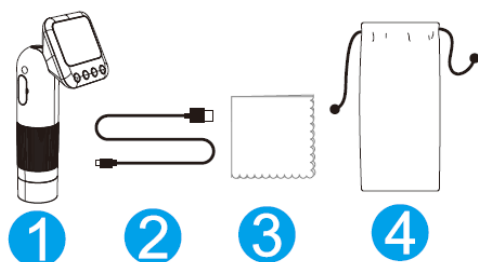

1. Digital microscope
2. USB-C cable (data transfer, charging)
3. Cleaning cloth
4. Carrying bag

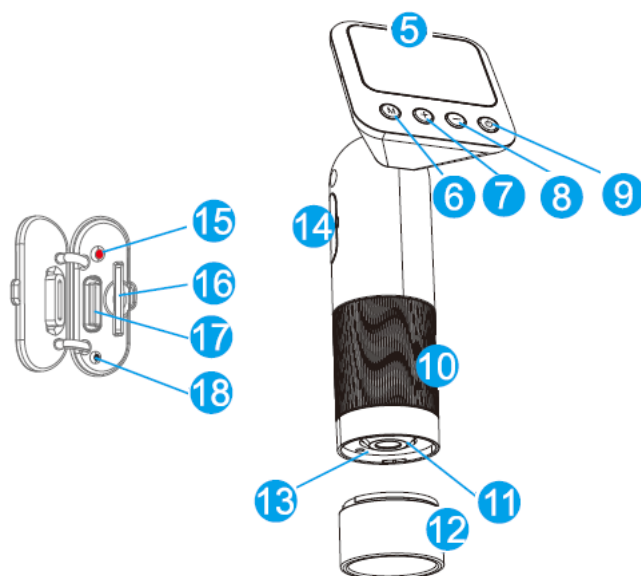

5. Display – display of the object (zoom 1x ~ 5x). You can save or record a screenshot of the display. Display of brightness and illumination.

6. M button

7. Button +

8. Button -

9. Power button

10. Focus – use the ring to focus on the subject

11. Lens – visually enlarges the object

12. Objective lens – used to track the object

13. LED ring – used to illuminate the monitored object

14. Output port – USB-C port for charging and data transfer. Cover the port with a cap when not in use.


15. Charging indicator

16. TF card slot

17. USB-C port

18. Reset

USE

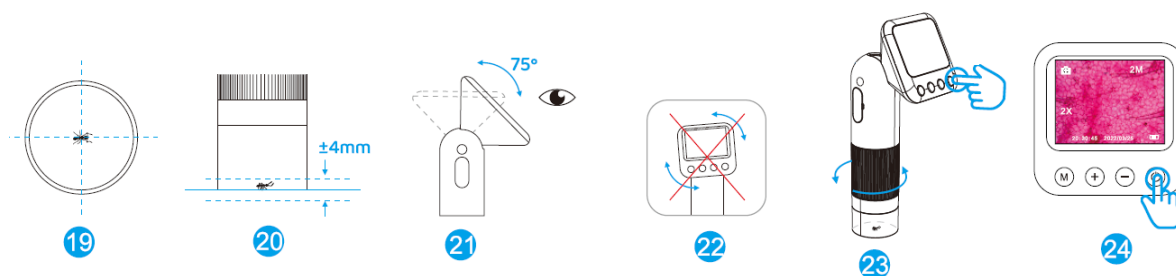

Microscope inspection

Hold down the button (9.) to start the display.

Hold down the button (7.) to start the light. Short press (7. / 8.) to change the zoom. Hold down the (8.) button to turn off the light.


Start observing

Point the microscope at the object and make sure it is centered (19.). The height from the objective lens should be $\pm 4\text{mm}$ (20.).

Adjust the display angle to your needs (21.). The display can be positioned at an angle of 75° , otherwise you may damage the holder (22.).

Carefully focus the image and observe the changes. You can record a photo or video using the buttons (23. / 24.).

Controls

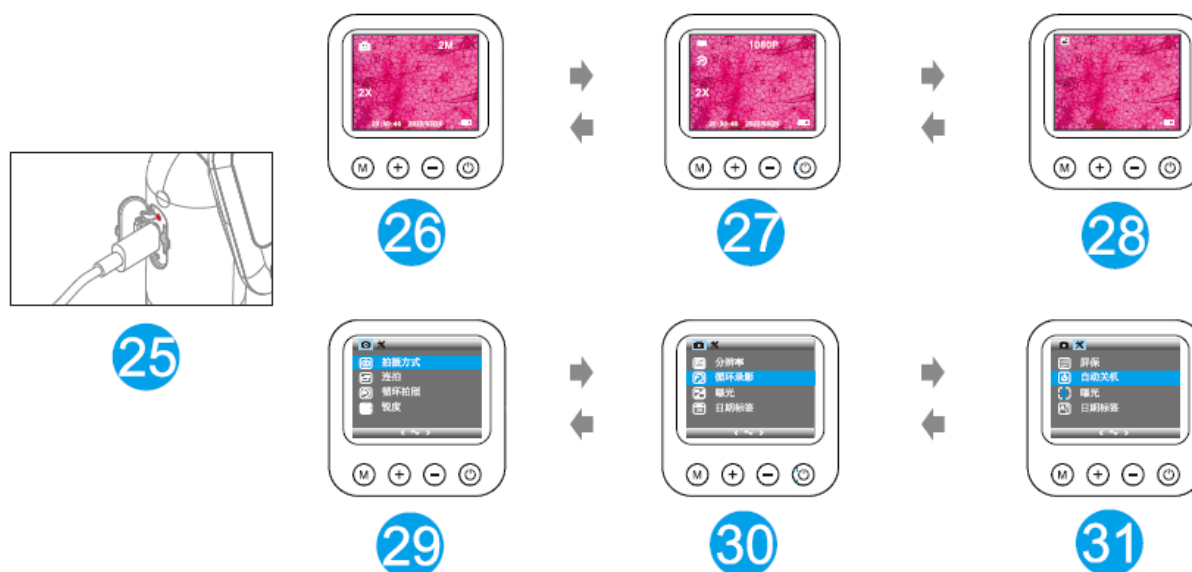

Press the power button (9.) for 2 seconds to start/stop the microscope.

Taking a photo/video and playing it back

Press the (6.) button to switch between modes (26. / 27. / 28.).

While taking a photo/video, press the button to zoom in (7.) or zoom out (8.), press the power button to take a photo/video.

Hold down (7.) to increase brightness, hold (8.) to decrease brightness. Hold the button (6.) to enter the setting (29. / 30. / 31.).

Playback of photos/videos

Press (7.) and (8.) to select pictures, or (9.) to play. During playback, press (7.) and (8.) to control the video.

Hold down the (6.) button to delete the file.

After entering the menu, press (6.) to switch between settings (photo / video / general), press (7.) and (8.) to cycle through the menu. To select the menu, press the power button. Press button (6.) to go back.

26. Photo interface

27. Video Interface

28. Playback

29. Photo settings interface

30. Video settings interface

31. Setup Interface

ADDITIONAL INFORMATION

Charging

Charge using the USB-C port and adapter. Charging time is approx. 2 hours, use time on a single charge is approx. 2 hours. While charging, the red LED lights up, after charging, the green LED lights up.

FAQ

Error	Cause	Solution
The microscope does not start	Low battery	Charge
The picture is not clear and is dark	The light is not on	Turn on the light
System stuck	Press the Restart button	Using a narrow object, press the restart button
The image is not sharp	Poorly focused, dirty surface	Check focus, clean
The display is too bright	Incorrectly set	Adjust the brightness in the settings

- Clean with soft and dry cloth.
- To connect to a computer, visit: www.apexellens.com
- Store in a shady and cool place.

ENVIRONMENT PROTECTION

After the product lifespan expires or if the possible repairing is uneconomical, dispose of it according to the local laws and is environmentally friendly in the nearest scrapyards.

By proper disposal you will protect the environment and natural resources. Moreover, you can help protect human health. If you are not sure of the correct disposing, ask local authorities to avoid law violations or sanctions.

Don't put the batteries among house waste but hand them in to the recycling place.

TERMS AND CONDITIONS OF WARRANTY, WARRANTY CLAIMS

General Conditions of Warranty and Definition of Terms

All Warranty Conditions stated here under determine Warranty Coverage and Warranty Claim Procedure. Conditions of Warranty and Warranty Claims are governed by Act No. 89/2012 Coll. Civil Code, and Act No. 634/1992 Coll., Consumer Protection, as amended, also in cases that are not specified by these Warranty rules.

The seller is SEVEN SPORT s.r.o. with its registered office in Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Prague 10, ČR, Company Registration Number: 26847264, registered in the Trade Register at Regional Court in Prague, Section C, Insert No. 116888.

According to valid legal regulations, it depends whether the Buyer is the End Customer or not.

"The Buyer who is the End Customer" or simply the "End Customer" is the legal entity that does not conclude and execute the Contract in order to run or promote his own trade or business activities.

"The Buyer who is not the End Customer" is a Businessman that buys Goods or uses services for the purpose of using the Goods or services for his own business activities. The Buyer conforms to the General Purchase Agreement and business conditions.

These Conditions of Warranty and Warranty Claims are an integral part of every Purchase Agreement made between the Seller and the Buyer. All Warranty Conditions are valid and binding, unless otherwise specified in the Purchase Agreement, in the Amendment to this Contract or in another written agreement.

Warranty Conditions

Warranty Period

The Seller provides the Buyer a 24 months Warranty for Goods Quality, unless otherwise specified in the Certificate of Warranty, Invoice, Bill of Delivery or other documents related to the Goods. The legal warranty period provided to the Consumer is not affected.

By the Warranty for Goods Quality, the Seller guarantees that the delivered Goods shall be, for a certain period of time, suitable for regular or contracted use, and that the Goods shall maintain its regular or contracted features.

Batteries

6-month battery warranty – we guarantee that battery's nominal capacity does not fall below 70% of its total capacity within 6 months of the product's sale.

The Warranty does not cover defects resulting from (if applicable):

- User's fault, i.e. product damage caused by unqualified repair work, improper assembly, insufficient insertion of seat post into frame, insufficient tightening of pedals and cranks
- Improper maintenance
- Mechanical damage
- Regular use (e.g. wearing out of rubber and plastic parts, moving mechanisms, joints, wear of brake pads/blocks, chain, tires, cassette/multi wheel etc.)
- Unavoidable event, natural disaster
- Adjustments made by unqualified person
- Improper maintenance, improper placement, damages caused by low or high temperature, water, inappropriate pressure, shocks, intentional changes in design or construction etc.

Warranty Claim Procedure

The Buyer is obliged to check the Goods delivered by the Seller immediately after taking the responsibility for the Goods and its damages, i.e. immediately after its delivery. The Buyer must check the Goods so that he discovers all the defects that can be discovered by such check.

When making a Warranty Claim the Buyer is obliged, on request of the Seller, to prove the purchase and validity of the claim by the Invoice or Bill of Delivery that includes the product's serial number, or eventually by the documents without the serial number. If the Buyer does not prove the validity of the Warranty Claim by these documents, the Seller has the right to reject the Warranty Claim.

If the Buyer gives notice of a defect that is not covered by the Warranty (e.g. in the case that the Warranty Conditions were not fulfilled or in the case of reporting the defect by mistake etc.), the Seller is eligible to require a compensation for all the costs arising from the repair. The cost shall be calculated according to the valid price list of services and transport costs.

If the Seller finds out (by testing) that the product is not damaged, the Warranty Claim is not accepted. The Seller reserves the right to claim a compensation for costs arising from the false Warranty Claim.

In case the Buyer makes a claim about the Goods that is legally covered by the Warranty provided by the Seller, the Seller shall fix the reported defects by means of repair or by the exchange of the damaged part or product for a new one. Based on the agreement of the Buyer, the Seller has the right

to exchange the defected Goods for a fully compatible Goods of the same or better technical characteristics. The Seller is entitled to choose the form of the Warranty Claim Procedures described in this paragraph.

The Seller shall settle the Warranty Claim within 30 days after the delivery of the defective Goods, unless a longer period has been agreed upon. The day when the repaired or exchanged Goods is handed over to the Buyer is considered to be the day of the Warranty Claim settlement. When the Seller is not able to settle the Warranty Claim within the agreed period due to the specific nature of the Goods defect, he and the Buyer shall make an agreement about an alternative solution. In case such agreement is not made, the Seller is obliged to provide the Buyer with a financial compensation in the form of a refund.

CZSEVEN SPORT s.r.o.

Registered Office: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Prague 10, Czech Republic

Headquarters: Dělnická 957, Vítkov, 749 01Warranty &
Service: Čermenská 486, Vítkov 749 01

CRN: 26847264VAT ID:CZ26847264

Phone: +420 556 300 970

Email: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK

Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Headquaters, warranty & service center: Električná 6471,
Trenčín 911 01, SK

CRN: 46259317VAT ID:SK2023299729

Phone: +421(0) 917 700 098E-mail:
objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk


About shipping




INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL

IN APL-MS008CS Mikroskop cyfrowy Apexel 400X-800X z wyświetlaczem LCD

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

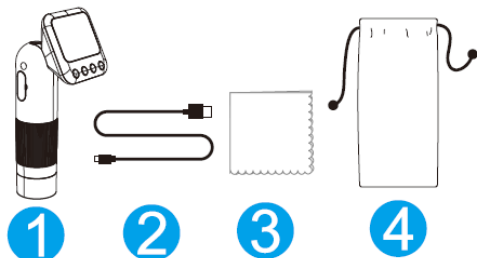

1. Mikroskop cyfrowy
2. Kabel USB-C (transfer danych, ładowanie)
3. Ściereczka do czyszczenia
4. Torba do przenoszenia

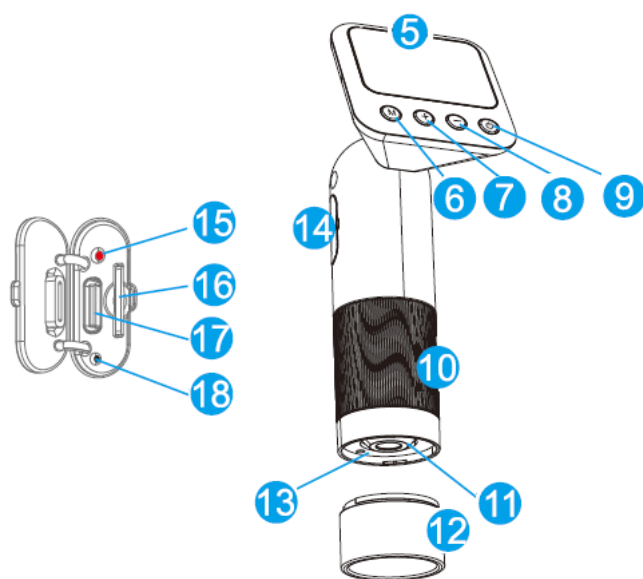

5. Wyświetlacz – wyświetlanie obiektu (zoom 1x ~ 5x). Możesz zapisać lub nagrać zrzut ekranu wyświetlacza. Wyświetlanie jasności i oświetlenia.

6. Przycisk M

7. Przycisk +

8. Przycisk -

9. Przycisk zasilania

10. Ostrość – użyj pierścienia, aby ustawić ostrość na obiekcie

11. Soczewka – optycznie powiększa obiekt

12. Soczewka obiektywu – służy do śledzenia obiektu

13. Pierścień LED – służy do oświetlenia monitorowanego obiektu

14. Port wyjściowy – port USB-C do ładowania i przesyłania danych. Zakryj port zatyczką, gdy nie jest używany.


15. Wskaźnik ładowania

16. Gniazdo karty TF

17. Port USB-C

18. Reset

UŻYTKOWANIE

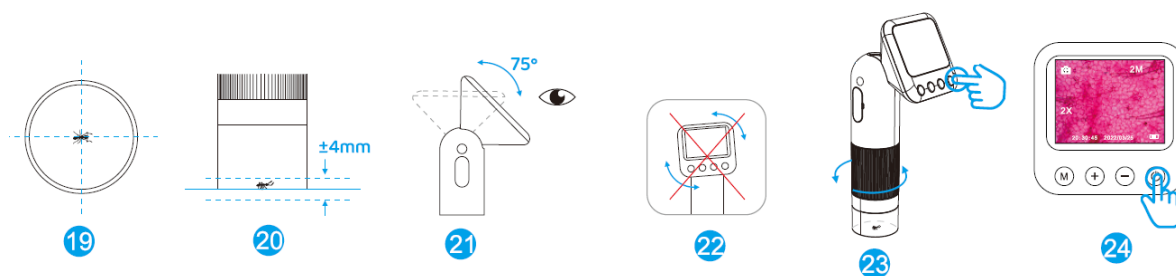

Inspekcja mikroskopu

Przytrzymaj przycisk (9.), aby uruchomić wyświetlacz.

Przytrzymaj przycisk (7.), aby uruchomić światło. Naciśnij krótko (7. / 8.), aby zmienić powiększenie. Przytrzymaj przycisk (8.), aby wyłączyć światło.


Rozpoczęcie obserwacji

Skieruj mikroskop na obiekt i upewnij się, że jest wyśrodkowany (19.). Wysokość od soczewki obiektywu powinna wynosić ± 4 mm (20.).

Dostosuj kąt wyświetlania do swoich potrzeb (21.). Wyświetlacz można ustawić pod kątem 75°, w przeciwnym razie można uszkodzić uchwyt (22.).

Ostrożnie ustaw ostrość obrazu i obserwuj zmiany. Możesz zrobić zdjęcie lub nagrać wideo za pomocą przycisków (23. / 24.).

Sterowanie

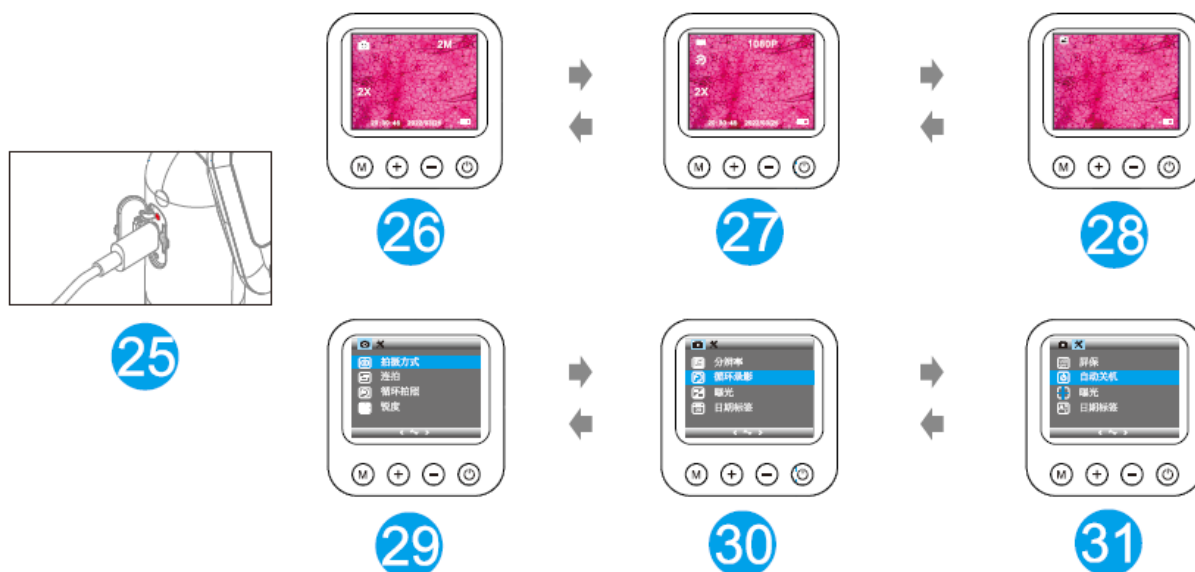

Aby uruchomić/zatrzymać mikroskop, naciśnij przycisk zasilania (9.) na 2 sekundy.

Robienie zdjęć/nagrywanie filmów i odtwarzanie ich

Naciśnij przycisk (6.), aby przełączać się między trybami (26. / 27. / 28.).

Podczas robienia zdjęcia/nagrywania filmu naciśnij przycisk, aby powiększyć (7.) lub pomniejszyć (8.), naciśnij przycisk zasilania, aby zrobić zdjęcie/nagrać film.

Przytrzymaj (7.), aby zwiększyć jasność, przytrzymaj (8.), aby zmniejszyć jasność. Przytrzymaj przycisk (6.), aby wejść do ustawień (29. / 30. / 31.).

Odtwarzanie zdjęć/filmów

Naciśnij (7.) i (8.), aby wybrać zdjęcia lub (9.), aby odtworzyć. Podczas odtwarzania naciśnij (7.) i (8.), aby sterować wideo.

Przytrzymaj przycisk (6.), aby usunąć plik.

Po wejściu do menu naciśnij (6.), aby przełączać się między ustawieniami (zdjęcia / wideo / ogólne), naciśnij (7.) i (8.), aby przełączać się między menu. Aby wybrać menu, naciśnij przycisk zasilania. Naciśnij przycisk (6.), aby wrócić.

26. Interfejs fotograficzny

27. Interfejs wideo

28. Odtwarzanie nagrałego dźwięku

29. Interfejs ustawień zdjęć

30. Interfejs ustawień wideo

31. Interfejs konfiguracji

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Ładowanie

Ładowanie za pomocą portu USB-C i adaptera. Czas ładowania wynosi ok. 2 godziny, czas użytkowania na jednym ładowaniu wynosi ok. 2 godziny. Podczas ładowania świeci się czerwona dioda LED, po naładowaniu świeci się zielona dioda LED.

FAQ (Najczęściej zadawane pytania)

Awaria	Przyczyna	Rozwiązanie
Mikroskop się nie uruchamia	Słaby akumulator	Ładowanie
Obraz nie jest wyraźny i jest ciemny	Światło nie świeci	Włącz światło
System się zawiesił	Naciśnij przycisk Restart	Używając wąskiego przedmiotu, naciśnij przycisk ponownego uruchomienia
Obraz nie jest ostry	Źle ustawiona, brudna powierzchnia	Sprawdź ostrość, wyczyść
Wyświetlacz jest zbyt jasny	Nieprawidłowo ustawiony	Dostosuj jasność w ustawieniach

- Wyczyść miękką i suchą ściereczką.
- Aby połączyć się z komputerem, odwiedź: www.apexellens.com
- Przechowywać w zacienionym i chłodnym miejscu.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).

2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w

Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

