



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

IN 28889 Elektrický invalidní vozík inSPORTline Hawkie Evo Plus II s polohovatelným opěradlem 700W



Dovozce:

Seven sport s.r.o.,
Strakonická 1151 / 2C
Praha 5-Hlubočepy 150 00, Czech republic
IČ: 268 47 264

Výrobce:

ZheJiang J&J Mobility Co., Ltd
#18, Baiyang Street, WuyiJinhua City,
ZheJian
China

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	5
MONTÁŽ	6
POUŽITÍ	9
OVLÁDÁNÍ	11
TABULKA INDIKÁTORŮ A PORUCH	12
DÁLKOVÝ OVLADAČ	13
SLOŽENÍ	15
BATERIE	16
NABÍJENÍ BATERIE	17
INFORMACE O BATERII	18
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ	18
SPECIFIKACE	18
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	18
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	19

SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


- Před použitím si přečtěte manuál a uschovejte si jej pro budoucí potřebu.
- Produkt nepoužívejte, pokud se na něm objeví ostré hrany.
- V případě poruchy okamžitě ukončete provoz a kontaktujte servis. Vozík sami neopravujte.
- Před použitím se naučte přístroj používat, vyhledejte bezpečný a otevřený prostor a vyhledejte pomoc druhé osoby do doby, než budete přístroj bezpečně používat.
- Před nasednutím a vysednutím se ujistěte že je produkt vypnutý.
- Vždy mějte nastavenou a jezděte takovou rychlostí aby jste neohrožovali sebe nebo ostatní osoby a jejich majetek.
- Doporučujeme vždy začínat na nejnižším rychlostním stupni.
- Některé komunikační zařízení mohou operovat na stejné frekvenci jako dálkový ovladač vozíku. Pokud máte jakýkoliv takové zařízení u sebe (telefon aj.) vždy nejprve vyzkoušejte že nebude zasahovat do ovládání.
- Některé transmitery mohou narušit dálkové ovládání vozíku.
- Pokud pozorujete jakýkoliv nežádoucí pohyb, nebo se vozík náhle zastaví, okamžitě jej vypněte.
- Nezasahujte, neupravujte a nemodifikujte produkt.
- Pokud nastane jakákoliv popsání situace okamžitě vypněte vozík: náhlý pohyb bez zadání uživatele, směr jízdy se nedá ovládat, selhání brzd.
- Vozík je určen pro přepravu jedné osoby.
- Nejezděte do příliš příkrých kopců.
- Nejezděte pod vlivem drog, léků a alkoholu.
- Za vozík nepřipevňujte další vozidla nebo předměty.
- Vozík nesmíte připojovat za další vozidla.
- Nepřekračujte maximální povolené stoupání.
- Nepohybujte náhle joystickem, pokud je vozík v pohybu.
- Nikdy nevozte na vozíku druhé osoby a nepřekračujte maximální povolenou nosnost vozíku.
- Pokud je vozík v běžném pohybu, nevypínejte jej, můžete poškodit motor nebo ovládání. Vozík vypínejte v pohybu POUZE pokud nad ním ztratíte kontrolu.
- Nejezděte po povrchu, který není zpevněný (písek, hluboká tráva, jemná hlína atd.)
- Nejezděte po schodech.
- Před čistěním a údržbou se ujistěte, že je vozík vypnutý.
- Vozík nezapínejte, pokud na něm nesedíte.
- Vozík není určen pro běžný silniční provoz. Jezděte pouze po komunikacích pro něj určených (chodník).
- Neměňte náhle směr jízdy (dopředu – dozadu). Směr jízdy měňte v moment, kdy se vozík zastaví.
- Z kopce vždy jezděte na nejnižší rychlost, joystick nechte ve střední poloze.
- Vždy mějte chodidla umístěna na opěrce nohou.

- Před jízdou se ujistěte, že je baterie plně nabitá.
- Vozík nabíjejte v dobře větrané místnosti.
- Před jízdou zkontrolujte utáhnutí a správné složení křesla.
- Před couváním se ujistěte, že za Vámi není žádná překážka. Couvejte na nejnižší rychlost.
- Vyhněte se sporadickým pohybům a náhlým změnám směru jízdy.
- Ruce a nohy mějte umístěny na opěrkách.
- Nejezděte přes překážky vyšší jak 5 cm.
- Nejezděte přes mezery delší jak 10 cm.
- Maximální stoupání je 12°.
- Pokud jedete v kopci, necouvejte.
- Nejezděte po povrchu, který je nakloněn více jak 3° do strany.
- Nejezděte na měkkém, nerovném nebo nezajištěném povrchu (tráva, štěrk).
- Před jízdou z kopce nastavte nejnižší rychlost, jízdou na kopci se prodlužuje brzdná dráha.
- Nejezděte skrz nerovnosti jako jsou patníky aj.
- Nejezděte ve vodě, po ledu nebo sněhu, nebo zhoršených viditelných podmínkách.
- Nenechávejte vozík vystavený přímému slunečnímu svitu a vlivu počasí.
- Chraňte před deštěm a vodou.
- Ovládací panel není voděodolný.
- Pravidelně kontrolujte stav pneumatik. Opotřeбенé okamžitě vyměňte.
- Nejezděte za deště nebo po mokré vozovce. Hrozí poškození elektroniky a baterie.
- Dálkový ovladač je napájen 2x AAA bateriemi
- Celková nosnost: 130 kg
- Dálkové ovládání až na 15 m (záleží na okolních podmínkách)
- Maximální rychlost až 6 km/h při optimálních podmínkách
- Maximální dojezd až 24 km při optimálních podmínkách
- Vozík je poháněn 2x 350W motory
- K nabíjení baterie používejte jen originální nabíječku.
- Nepoužívejte nabíječku, je-li poškozena.
- Nenabíjejte baterii bez dozoru.
- Nenabíjejte baterii, je-li poškozena nebo pokud se do ní dostala voda.
- Baterii nabíjejte v dobře větraném prostoru, mimo dosah osob, kde nejsou hořlavé materiály a nehrozí riziko požáru.
- Baterie by rozhodně neměla být vystavena vodě, vlhkosti a je potřeba se vyhnout přímému proudu vody.

POPIS PRODUKTU




1	Joystick
2	Nabíjecí port joysticku
3	Bezpečnostní pás
4	Opěrky nohou
5	8" přední kola
6	Tlačítko pro vyklopení opěrky rukou
7	12" zadní kola

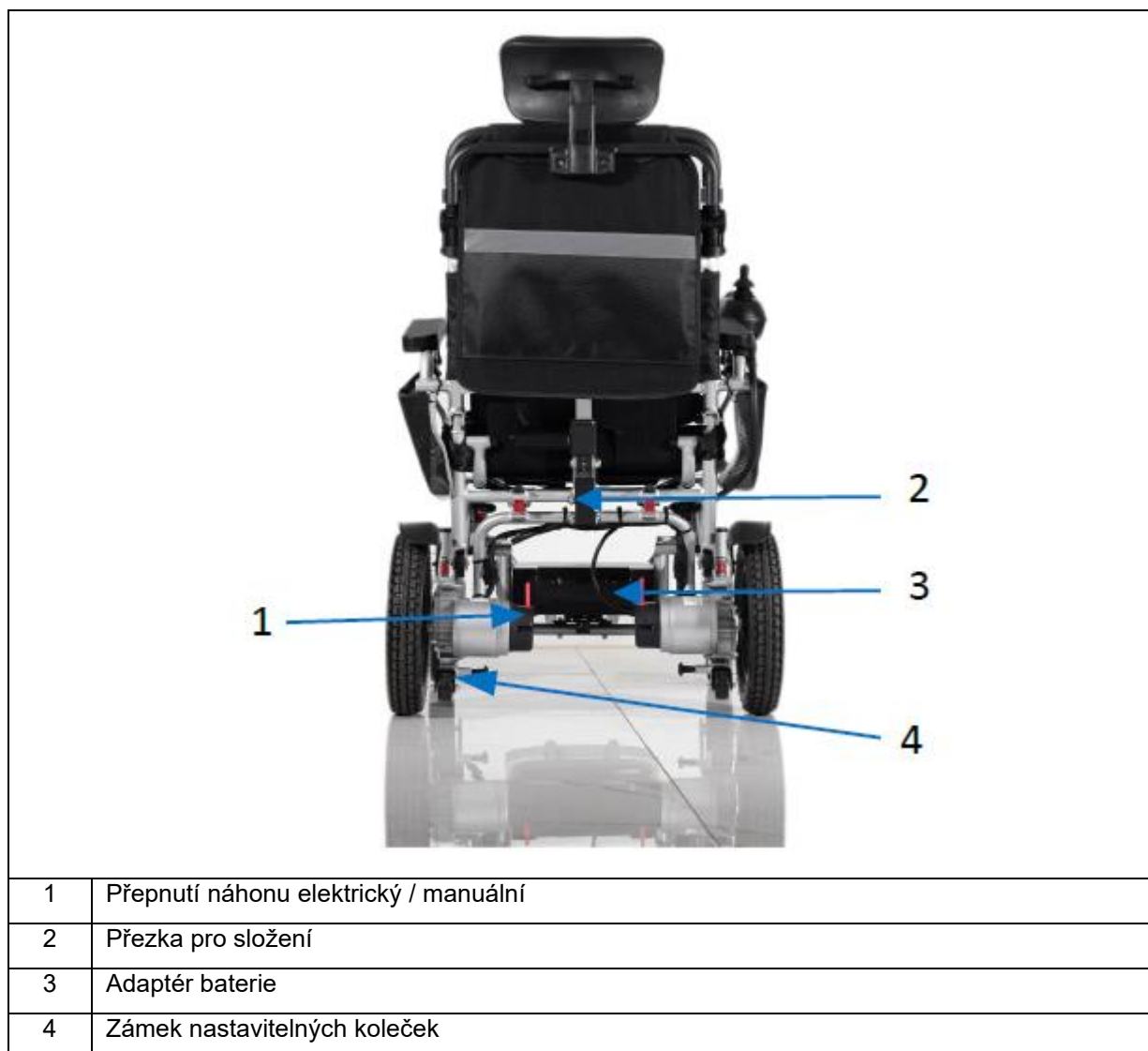

MONTÁŽ

Opěrka hlavy

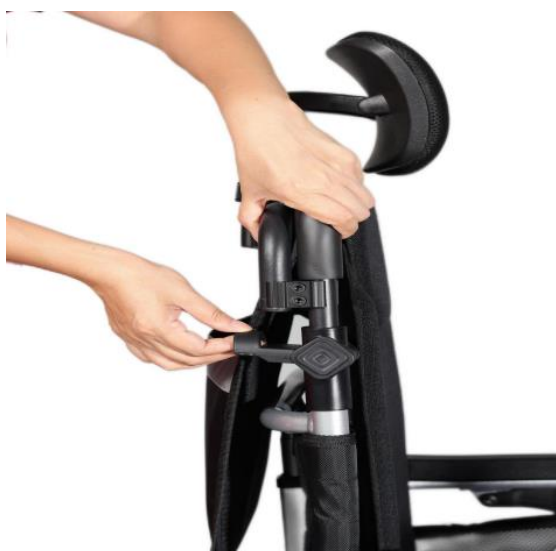

Povolte šrouby, nastavte pohodlnou polohu opěrky a poté šrouby opět utáhněte.



Ujistěte se, že je opěrka správně dotažena.



Uzamkněte opěrku v dané poloze.

Opěrka je polohovatelná nahoru a dolů.



Nastavitelná opěrka na nohy ve 3 úrovních(zadní/přední výška od země):

- 8,5/11 cm
- 9/10,5 cm
- 11/12,5 cm

Montáž joysticku



1. Nastavení polohy opěrky

2. Tlačítko potvrzení

Upevněte joystick na pravou nebo levou opěrku.

Pokud chcete upravit náklon opěrky, stiskněte tlačítko pro změnu náklonu, dokud nezačne blikat prostřední dioda.



Poté stiskněte tlačítko pro potvrzení, uslyšíte 3x zvukové signály.



Pomocí joysticku poté můžete měnit náklon dopředu nebo dozadu. Po nastavení náklonu, stiskněte tlačítko pro potvrzení.




Dozadu



Potvrzení

Dopředu

Připojte ovladač na pravou nebo levou opěrku k motoru a baterii.

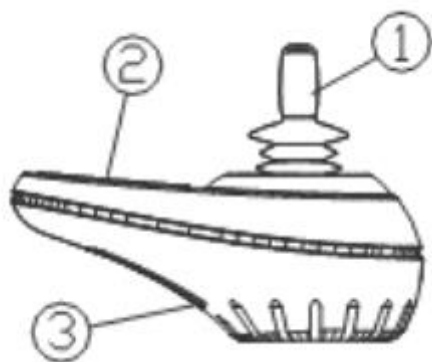

1. Joystick

2. Ovládací panel

3. Napájecí port

Joystick a ovládací panel chraňte proti nárazům a pádům.


Chraňte ovládací panel a joystick proti nadměrné vlhkosti a nečistotám.

Ovládací panel a joystick čistěte suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné agresivní čisticí prostředky.

POUŽITÍ

Před jízdou se nejprve seznámte s ovládáním. Jízdu si nejprve vyzkoušejte za asistence druhé osoby na bezpečném místě bez provozu.


Před nasednutím se vždy ujistěte, že je vozík vypnutý. Nastavte takovou maximální rychlost, která bude odpovídat vašim schopnostem. Doporučujeme nechat rychlost na nižších hodnotách, dokud se kompletně neseznámíte s ovládáním vozíku.

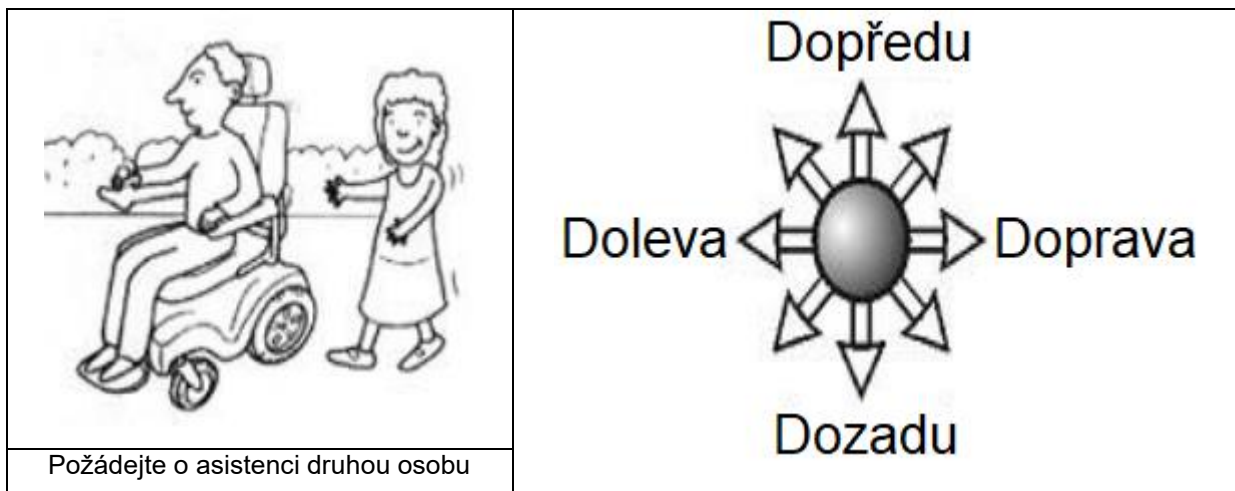

Trénink ovládání vždy provádějte na nejnižší rychlost. Vždy pohybujte joystickem v požadovaném směru jízdy.

Nejprve si vyzkoušejte pohyb dopředu. Poté si vyzkoušejte „esíčka“.

Pokud zvládnete jízdu dopředu a do stran, naučte se couvat. Během couvání dávejte pozor na rychlost a zda nejsou v cestě další osoby nebo překážky.

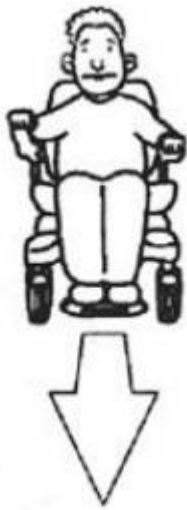		
Dopředu	Esíčka	Dozadu

Jakmile pustíte joystick, pohyb vozíku se zastaví.


Pokud nastane jedna z následujících situací okamžitě vypněte vozík a vypojte baterii:

- Náhlý pohyb bez zadání signálu
- Směr jízdy není pod kontrolou
- Chyba brzd

Během jízdy dodržujte následující:

- Během couvání se ujistěte, že za vámi není žádná překážka. Vždy couvejte na nejnižší rychlost.
- Brzděte pomalu. Nedělejte nepravdivé a náhlé změn pohybu.
- Vždy mějte končetiny na opěrkách.
- Nikdy nenajíždějte na překážky, kterou jsou vyšší jak 5 mm.
- Nikdy nepřejíždějte mezery širší jak 10 cm.
- Nejezděte na v terénu, který má náklon vyšší jak 12°.
- Nikdy necouvejte v terénu, který je nakloněn.
- Nejezděte na šikmém povrchu, hrozí riziko překlopení.
- Nejezděte po nezpevněném terénu jako jsou tráva, štěrk nebo polní cesty.
- Během jízdy z kopce jeďte pomalu a mějte rychlost pod kontrolou.
- Před vystoupením z vozíku se ujistěte, že jste na rovném povrchu a vozík je vypnutý.

OVLÁDÁNÍ

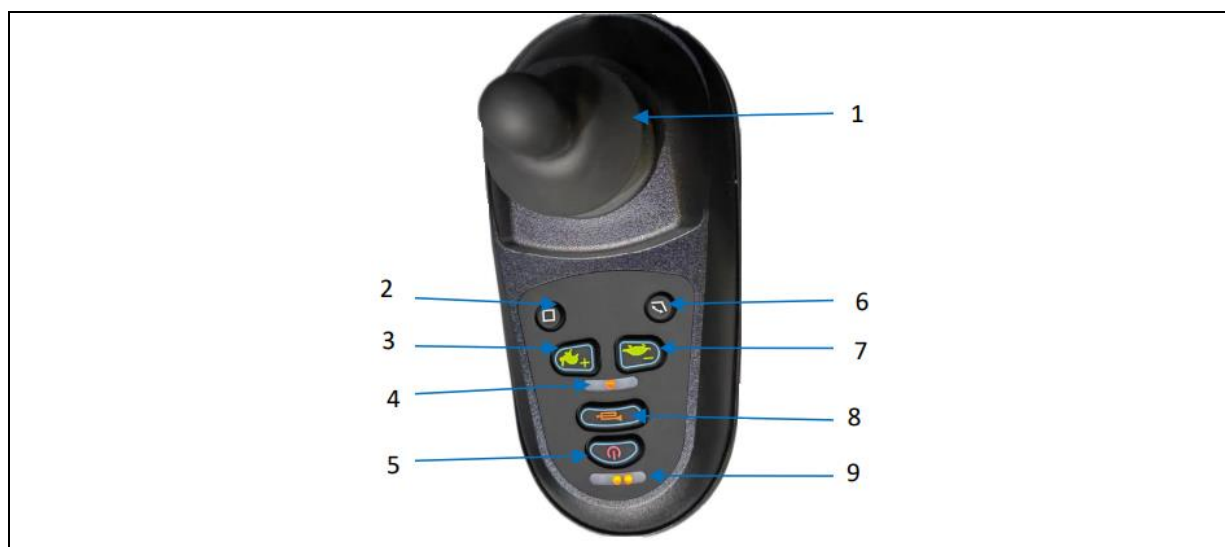

1.	Joystick	6.	Polohování opěrky
2.	Tlačítko potvrzení	7.	Zpomalení
3.	Zrychlení	8.	Klakson
4.	Indikátor rychlosti	9.	Indikátor baterie
5.	Tlačítko napájení		

Napájení

Stiskem tlačítka zapnete nebo vypnete vozík. V případě nouze můžete tlačítko použít pro zastavení.

Na ovládacím panelu je zobrazený aktuální stav baterie.

Během zapnutí se rozsvítí všechny indikátory a zobrazí se aktuální stav baterie.

Během vypnutí zhasnou všechny indikátory.

Joystick

Pomocí joysticku ovládáte rychlost a směr jízdy. Čím dále je joystick od středu, tím rychleji se vozík pohybuje. Pokud joystick pustíte, vrátí se do původní polohy ve středu a vozík se zastaví.

Rychlost (S1 – S5)

Indikátory zobrazují maximální rychlost. Indikátory jsou rozděleny na 5 segmentů, čím vyšší číslo, tím je vyšší maximální rychlost.

Klakson

Stiskem se spustí klakson.

Snížení rychlosti

Stiskem tlačítka snížíte maximální možnou rychlost. Nastavení musí být vždy provedeno, když není vozík v pohybu.

Zvýšení rychlosti

Stiskem tlačítka zvýšíte maximální možnou rychlost. Nastavení musí být vždy provedeno, když není vozík v pohybu.

TABULKA INDIKÁTORŮ A PORUCH

Indikace	Porucha	Možné řešení
Všechny LED diody jsou zhasnuty a neozve se žádný zvukový signál	Vozík není napájen, zkontrolujte kabely a připojení	Zkontrolujte připojení napájení
Všechny LED diody jsou rozsvíceny	Vozík je napájen správně a může být používán	
Červená levá LED dioda je rozsvícena a ozve se zvukový signál	Slabá baterie	Dobijte baterii. Pokud musíte baterii dobíjet častěji než obvykle, nechte ji zkontrolovat, případně nahradit.
2x dlouhé zvukové signály po 2x krátkých	Porucha levého motoru	Zkontrolujte, zda je levý motor správně připojen k napájení
4x dlouhé zvukové signály po 2x krátkých	Porucha pravého motoru	Zkontrolujte, zda je pravý motor správně připojen k napájení
6x dlouhých zvukových signálů po 2x krátkých	Přepětí ovladače	Zkontrolujte přepětí. Vypněte a zapněte vozík.
7x dlouhých zvukových signálů po 2x krátkých	Porucha joysticku	
8x dlouhých zvukových signálů po 2x krátkých	Porucha ovladače	Vyměňte ovladač
9x dlouhých zvukových signálů po 2x krátkých	Porucha ovladače	Vyměňte ovladač

Změna náhonu – manuální / elektrický

Pomocí páček na obou motorech můžete přepnout náhon na manuální tlačení nebo pomocí dvou elektrických motorů.

Pro náhon pomocí motorů, musí být obě páčky směrem nahoru.

Pro manuální náhon, musí být obě páčky dolů.



DÁLKOVÝ OVLADAČ

Dálkový ovladač je napájen 2x AAA bateriemi.

	1. Joystick
	2. Tlačítko napájení
	3. Snížení rychlosti
	4. Opěrka zad
	5. Pro tento model, tlačítko nemá funkci
	6. Pro tento model, tlačítko nemá funkci
	7. Zrychlení
	8. Klakson
	9. Pro tento model, tlačítko nemá funkci

Spárování dálkového ovladače

Zapněte ovladač na vozíku.



Stiskněte tlačítko napájení na dálkovém ovladači po dobu 5 vteřin.



Stiskněte tlačítko pro zpomalení na ovladači vozíku dokud se nerozsvítí dioda uprostřed.



Stiskněte tlačítko klaksonu na ovladači vozíku.



Stiskněte tlačítko pro snížení rychlosti na dálkovém ovladači dokud tlačítko napájení nepřestane blikat.



LED dioda na ovladači vozíku se vypne a ovladače jsou spárovány.



Pro změnu náklonu opěradla stiskněte tlačítko B a poté pomocí šipek upravte náklon.



Pomocí joysticku pak můžete ovládat vozík.




SLOŽENÍ



Stiskněte přezku za opěrkou.



Uchopte opěradlo a zatlačte dopředu.

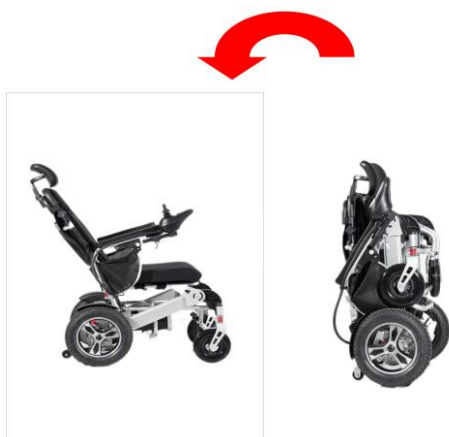

Složte vozík.



Pomocí šroubu pod madlem můžete upravit vzdálenost ovladače.

Pro složení model je nutné povolit matici a madla zaklopit dozadu.

Vyjmutí baterie



Vytáhněte napájecí kabel



Uchopte baterii a vytáhněte z rámu.

BATERIE

Vozík používá 24 V 12 Ah lithiovou baterii. Baterii měňte pouze v autorizovaném servise.

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70 % své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

V současné době jsou nejpoužívanější baterie lithium iontové (Li-ion). Výhoda těchto baterií je především v nízké hmotnosti a dlouhé životnosti. Li-ion baterie mají velmi nízké samočinné vybíjení. Od prvního nabití je potřeba baterii udržovat stále v jejím pracovním cyklu (vybití/nabití), i při nepoužívání baterie dochází k jejímu samovolnému vybíjení, které je přirozené. Baterii doporučujeme pravidelně dobíjet i v případě nepoužívání vozíku cca 1x za měsíc a skladovat nabitě na 60 – 80% kapacity. V opačném případě může dojít k poškození baterie, které může způsobit kratší dojezd nebo v horším případě úplnou nefunkčnost. Pravidelným dobíjením prodlužujete životnost baterie. Před prvním použitím doporučujeme provést plné nabití baterie. Jelikož baterie nemají paměťový efekt, je možné je dobíjet kdykoli. Baterii udržujte v nabitěm stavu a dobíjejte vždy po jízdě, nikoliv až před následující jízdou.

Pro správnou funkčnost a bezpečné použití baterie se řiďte instrukcemi v manuálu. Pokud je baterie poškozená, uniká z ní kapalina nebo abnormální zápach přestaňte baterii ihned používat.

- Životnost baterie je limitována. Pokud používáte baterii, která přesahuje běžnou životnost, tak se může zvýšit frekvence nabíjení a snížit dojezd vozíku.
- Baterii neotvírejte ani nevhazujte do ohně. Do baterie nekládejte cizí předměty.
- Nedotýkejte se baterie kovovými předměty. Baterie může explodovat nebo být poškozená.
- Ideální teplota pro nabíjení baterie je +10 °C až +30 °C.
- Pokud baterii používáte po delší dobu, bude její teplota vyšší. Toto je běžný stav baterie.
- Pokud používáte baterii v chladném prostředí, její dojezd je nižší.
- Baterii sami neopravujte ani neupravujte.

NABÍJENÍ BATERIE

Baterie je nabíjena AC 110 – 240V 50 – 60 Hz, výstup 24V, 2Ah nabíječkou.

Baterie vydrží více než 300 nabíjecích cyklů. Předpokládána výdrž 450 cyklů.

Před prvním použitím nabijte baterii. Poté baterii vybijte používáním, nejezděte rychle a příliš se nevzdalujte od místa bydliště, dokud nebudete vozík umět ovládat. Poté znovu nabíjejte baterii po dobu 8 – 14 hodin. Po 4 – 5 nabíjecích cyklech je kapacita baterie využívána na 100 %.

Inteligentní nabíječka dodávaná k vozíku automaticky nabíječku odpojí, pokud je baterie nabitá na 100% - má ochranu proti přebíjení. Z důvodu bezpečnosti nedoporučujeme nechat vozík připojený k nabíječce po úplném nabití baterie.

Nabíječku během nabíjení nikdy nepříkrývejte, jinak hrozí její poškození.

Nabíječka se může poškodit díky abnormálnímu vystavení vodě, nárazům apod. V tomto případě se na ní nevztahuje záruční lhůta. Nabíjejte vždy jen vypnutý vozík.

Nikdy nenabíjejte baterii jinou nabíječkou, než tou, která k vozíku patří! Jinak je zde vážné riziko poškození či zničení baterie. Naše společnost nezodpovídá za zničení baterie či nabíječky pokud tento pokyn nebudete dodržovat.

Postup při nabíjení

1. Odejměte ochrannou krytku nabíjecího konektoru (zásuvky) a zasuňte do ní konektor (zástrčku) nabíječky.
2. Připojte nabíječku do elektrické sítě (230 V).
3. Proces nabíjení je funkční, pokud LED světlo na nabíječce svítí červeně. Po nabití baterie se LED světlo rozsvítí zeleně.
4. Po nabití baterie odpojte nabíječku z elektrické sítě a konektor nabíječky (zástrčku) z konektoru vozíku (zásuvky).
5. Pečlivě zavřete nabíjecí konektor na vozíku ochrannou krytkou.

Při nabíjení mějte nabíjenou baterii vždy pod dohledem. Nabíjení baterie při nižších teplotách než 10°C a vyšší než 40°C může baterii vážně poškodit. V případě poškození nabíječky (nebo přívodního kabelu) ji nikdy nepřipojujte do el. sítě. Před nabíjením musí být vozík vypnutý.

INFORMACE O BATERII

Baterii dobíjejte co nejčastěji po použití. Baterie se postupně vybíjí i pokud není používána. Pokud vozík nepoužíváte pravidelně baterii dobíjejte jednou za týden. Používejte pouze originální nabíječku.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Pro čištění používejte jemné čisticí prostředky a vlhký hadřík. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Vždy všechny části řádně osušte, obzvlášť elektronické části.
- Ovladač a panel držte mimo dosah vlhkosti.
- Kontrolujte stav kabelů a připojení.
- Pro čištění nepoužívejte proud vody ani vysokotlaké čističe.
- Vozík skladujte na dobře větraném místě bez korozivních plynů a vlhkostí vzduchu menší jak 80 %.

SPECIFIKACE

Model	W5521 s polohováním
Rozměr (složený)	1100x630x1180 mm
Hmotnost s baterií	36 kg
Přední kola	200x50 mm
Zadní kola	320x60 mm
Nosnost	130 kg
Rychlost dopředu	0 – 6 km/h
Dojezd na jedno nabití	Cca. 24 km
Motor	2x 24V/350W
Otáčecí rádius	600 mm
Baterie (lithiová)	24V/12Ah
Brzdy	Elektromagnetické
Kolečka proti překlopení	50x25 mm
Náklon	Max. 25°
Nabíječka	AC100-240V 50/60 Hz Výstup: 24V 2A

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku k této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolčka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park,
109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamacie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamacie@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamacie zboží



SK Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Dovozce:

Seven sport s.r.o.,
Strakonická 1151 / 2C
Praha 5-Hlubočepy 150 00
IČ: 268 47 264
Czech republic

prohlašuje na vlastní zodpovědnost, že

výrobek:

**IN 28889 Elektrický invalidní vozík inSPORTline Hawkie Evo Plus II s polohovatelným
opěradlem 700W
je ve shodě**

s technickými požadavky na výrobek stanovenými nařízením vlády

Výrobek splňuje (EU)2017/745 a následující normy:

(EU) 2017/745	EN ISO 14971:2019
EN ISO 15233-1:2021	EN ISO 20417:2021
EN ISO 10993-1:2020	EN ISO:10993-5:2009
EN ISO 10993-10:2013	EN12184:2014
EN 60601-1:2006+A1:2013+AC:2014+A12:2014+A2:2020	
EN 60601-1-2:2015+A1:2020	



MSDS / Anbotek 18270BC10298503 / 01.04.2022

Výrobce:

ZheJiang J&J Mobility Co., Ltd
#18, Baiyang Street, WuyiJinhua City,
ZheJian. China

Vítkov 1.1.2024



Seven Sport s.r.o.
Bořivojova 35/378, 150 00 Praha 3
IČO: 26847264 DIČ: CZ26847264
tel./fax: +420 556 300 970 ②

SEVEN SPORT s.r.o.
Roman Košťál, jednatel společnosti